

Allora

Handbuch

Inhaltverzeichnis

1 - Einführung 3

- 1.1 Reinigungsanleitung 3
- 1.2 Die Tragetasche 4

2 - Sicherheitsvorkehrungen 5

3 - So schalten Sie das Allora ein/aus. 7

- 3.1 Reset 7

4 - 1. und 2. Anzeige 9

5 - Die Tastatur 13

- 5.1 Funktionstaste 14
- 5.2 Tontaste 16
- 5.3 Mitteilungen-Taste 16
- 5.4 Tontaste 17
- 5.5 Pfeiltaste (aufwärts) 17
- 5.6 Pfeiltaste (abwärts) 17
- 5.7 Pfeiltaste (links) 17
- 5.8 Pfeiltaste (rechts) 17
- 5.9 Bestätigungstaste 17
- 5.10 Löschen- bzw. Ignorieren-Taste 17
- 5.11 Programmtaste 18
- 5.12 Favoritentaste 18
- 5.13 Ein/Aus-Schalter 18
- 5.14 Korrekturtaste 18
- 5.15 Eingabetaste 18
- 5.16 Umschalttaste 19

6 - Anschlüsse und Anzeigen 21

- 6.1 Vorderseite 21

- 6.1.1 Mikrofon 21
- 6.1.2 Batterieladeanzeige 21
- 6.1.3 Ein/Aus-Anzeige 21
- 6.1.4 Infrarot-Fenster 22
- 6.2 Seite 22
 - 6.2.1 Schalter 1 22
 - 6.2.2 Schalter 2 22
 - 6.2.3 USB-Anschluss 23
 - 6.2.4 Kopfhörer 23
 - 6.2.5 Netzteil-Anschluss 23
- 6.3 Rückseite 23
- 6.4 Die zweite Anzeige 24
 - 6.4.1 Ein/Aus 24
 - 6.4.2 Reset 25
 - 6.4.3 Lauter 25
 - 6.4.4 Leiser 25

7 - Batterien 27

- 7.1 Austausch der Batterie des Allora 27
- 7.2 Austausch der Batterie in der zweiten Anzeige 28

8 - Allora-Anwendungen 29

- 8.1 Kommunikation 29
 - 8.1.1 So speichern Sie Mitteilungen 30
- 8.2 Aufnahmen 31
- 8.3 Notizen erstellen 32
 - 8.3.1 Notizen erstellen 32
 - 8.3.2 Notiz speichern 32
 - 8.3.3 Notiz öffnen 32
 - 8.3.4 Notiz speichern (USB) 32
 - 8.3.5 Notiz öffnen (USB) 32
 - 8.3.6 Notiz löschen 33
- 8.4 Umgebungssteuerung 33

Allora 2

8.4.1 So nehmen Sie die IR-Codes auf 33

8.4.2 Übertragung der IR-Codes 34

8.5 Textnachrichten senden und empfangen 34

8.5.1 Installieren der SIM-Karte 34

8.5.2 PIN-Code eingeben 35

8.5.3 Verbindung zu einem Telekommunikationsanbieter 36

8.5.4 So senden Sie eine Textnachricht. 36

8.5.5 Textnachrichten erhalten 37

9 - So wird das Allora mithilfe von Schaltern bedient. 39

9.1 Bearbeitung mit einem Schalter 39

9.2 Zugriff auf 2 Schalter 40

10 - Überblick über das Menü und die verschiedenen Einstellungen 43

10.1 Sprachausgabe 44

10.1.1 Sprache 45

10.1.2 Stimme 45

10.1.3 Geschwindigkeit 45

10.1.4 Lautstärke der Stimme 45

10.1.5 Allgemeine Lautstärke 45

10.1.6 Zeichen-Echo 45

10.1.7 Wort-Echo 45

10.1.8 Enter-Echo 46

10.1.9 Aussprache hinzufügen 46

10.1.10 Aussprache entfernen 46

10.1.11 Tastatur 47

10.1.12 Typ 47

10.1.13 Ton 47

10.1.14 Haltezeit für Nummern 47

10.1.15 Verzögerung 47

10.1.16 Haltezeitverzögerung 48

10.2 Scan-Vorgang 48

10.2.1 Algorithmus 48

10.2.2 Durchlauf 49

10.2.3 Auswahl 49

10.2.4 Schrittzeit 49

10.2.5 Reihe verlassen 49

10.2.6 Scan-Pause 49

10.2.7 Verzögerung 49

10.2.8 Ton 49

10.3 Anzeige 50

10.3.1 Helligkeit 50

10.3.2 Nur Großbuchstaben 50

10.3.3 Text-Schriftart 50

10.3.4 Vorhersage-Schriftart 50

10.4 Zweite Anzeige 51

10.4.1 Text 51

10.4.2 Text während Tippens 51

10.4.3 Nur Großbuchstaben 51

10.4.4 Zeilen 51

10.4.5 Audio 52

10.4.6 Blättern – Typ 52

10.5 Vorhersage 52

10.5.1 Vorhersage 52

10.5.2 Wort hinzufügen 53

10.5.3 Wort entfernen 53

10.5.4 Autom. Lernen 53

10.5.5 Groß-/Kleinschreibung 54

10.5.6 Max. Wiederholungen 54

10.5.7 Satzzeichenanpassung 54

10.6 Datum/Uhrzeit 54

10.6.1 Datum ändern 55

10.6.2 Uhrzeit ändern 55

10.7 Handy 55

10.7.1 Handy 56

10.7.2 SMS-Ton 56

10.7.3 Pin-Code 56

10.7.4 (Erneut) verbinden 56

10.8 Allgemein 56

10.8.1 Menüsprache 57

10.8.2 Menüpasswort festlegen 57

10.8.3 Standby nach 57

10.8.4 Herunterfahren 58

10.8.5 Statusleiste 58

Allora 2

- 10.8.6 Abkürzungen 58
- 10.8.7 Aufnahme mit Geräuschfilter 58
- 10.8.8 Mem-Nachricht lesen 58
- 10.8.9 Stern 58
- 10.8.10 Umschalttaste Stern 59
- 10.8.11 Fn+Stern 59
- 10.8.12 Werkzeugmenü 59
- 10.8.13 Backup/Wiederherstellen 59
- 10.8.14 Vollständiges Backup erstellen 60
- 10.8.15 Backup wiederherstellen 60
- 10.8.16 Update installieren 60
- 10.8.17 Daten-Backup erstellen 60
- 10.8.18 Daten-Backup wiederherstellen 61
- 10.8.19 Werkseinstellungen wiederherstellen 61

© Copyright Jabbla

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Jabbla in irgendeiner Form reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, in eine andere Sprache übersetzt oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise übermittelt werden – weder elektronisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell, noch durch Aufzeichnung oder auf irgendeine andere Weise.

www.jabbla.com

1 - Einführung

Das Allora ist ein einfach zu verwendendes, textbasiertes Kommunikationsmittel. Jede auf der Allora-Tastatur eingegebene Mitteilung wird mit natürlicher Stimme in sehr guter Qualität ausgesprochen. Durch eine intelligente Wort- oder Satzvorhersage, vorab gespeicherte Mitteilungen und eine Erweiterung mit Abkürzungen wird die Kommunikation erheblich beschleunigt.

Über ein abnehmbares zweites Display mit hohem Kontrast können ein oder mehrere Kommunikationspartner die geschriebene Mitteilung mitlesen.

Das Allora bietet auch ein internes Mikrofon für Sprachaufnahmen. Diese Aufnahmen können mit individuellen Tasten auf der Tastatur verknüpft werden.

Allora kann optional mit einem GSM-Modul ausgerüstet werden, mit dem Textnachrichten (SMS) gesendet und empfangen werden können.

Das Allora bietet eine Funktion zur Kommunikationsunterstützung und dient Menschen mit Kommunikationsbehinderung zur allgemeinen Nutzung im täglichen Leben, vorausgesetzt, sie haben die motorischen und geistigen Fähigkeiten zur Bedienung des Gerätes. Das Gerät ist nicht für klinisch-medizinische, therapeutische oder diagnostische Zwecke geeignet.

Das Allora ist zusätzlich mit einer (IR) Infrarot-Umgebungssteuerung ausgestattet. Dieses Modul (ECU, Environmental Control Unit) kann IR-Codes erlernen und übertragen und so weitere Geräte steuern. Es wurde für allgemeine Verwendungszwecke konzipiert, beispielsweise für Geräte mit audio-visueller Funktion und automatisch gesteuerten Anwendungen im Haus. Diese ECU-Erweiterung ist nicht für klinisch-medizinische, therapeutische oder diagnostische Zwecke geeignet.

Das Allora ist ein tragbares Gerät, kann aber auch auf einem Rollstuhl befestigt werden. Eine Tragetasche erleichtert das Mitführen.

Die Bedienung des Allora ist problemlos auch mit den erweiterten Funktionen zur Unterstützung der Kommunikation. Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Geräts dieses Handbuch, um vollen Nutzen aus Ihrem Allora zu ziehen.

1.1 Reinigungsanleitung

Die regelmäßige Reinigung des Allora empfiehlt sich, um der Ausbreitung von Bakterien entgegenzuwirken. Insbesondere die Tastatur verlangt verstärkte Aufmerksamkeit; hier siedeln sich Bakterien besonders gerne an.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln, die für Computerzubehör bestimmt sind, oder ein antiseptisches Desinfektionsmittel, sind zu empfehlen. (Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung). Verwenden Sie stets ein feuchtes (nicht nasses) Tuch.

Zum Entfernen von Staub verwenden Sie ein trockenes weiches Tuch. Für sichtbare Schmutzstellen auf dem Gehäuse können Sie ein feuchtes Tuch verwenden. Sorgen Sie dafür, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen der Lautsprecher und des Mikrofons oder in die Anschlüsse eindringen. Verschmutzungen um die Anschlüsse herum können mit einem Wattestäbchen entfernt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms ein trockenes Tuch. Benützen Sie keine Papiertaschentücher, da diese kleine Kratzer auf dem Bildschirm hinterlassen. Zum Entfernen von Fettflecken oder Flecken auf dem Bildschirm können speziell zum Reinigen von Bildschirmen hergestellte Reinigungsmittel (als Spray oder Tücher) oder ein keimtötendes Desinfektionsmittel verwendet

werden. Während der Reinigung muss starker Druck auf den Bildschirm vermieden werden.

1.2 Die Tragetasche

Das Allora wird mit einer Tragetasche ausgeliefert, in der das Gerät sicher verwendet werden kann. Legen Sie das Gerät zur Beförderung in die Tragetasche und verwenden Sie die Tragegurte, damit es nicht zu Boden fallen kann. Wenn Sie die Tragegurte an den entgegengesetzten Enden der Tasche befestigen, bleibt das Gerät beim Tragen stabil und fest an seinem Platz. Stellen Sie stets sicher, dass die Tragetasche verschlossen ist und das Allora nicht herausfallen kann.

Verwenden Sie ein trockenes oder ein leicht angefeuchtetes Tuch zur Reinigung der Tragetasche. Sie können auch eine weiche Handbürste verwenden.

2 - Sicherheitsvorkehrungen

Aufgrund seines geringen Gewichtes ist das Allora tragbar und für unterwegs geeignet. Wir empfehlen jedoch das Allora stets mithilfe der Tragetasche und den Tragegurten zu befördern. Auf diese Weise vermeiden Sie versehentliches Fallen lassen und damit einhergehende mögliche Beschädigungen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß befestigt und arretiert ist, wenn Sie das Allora auf einem Rollstuhl sitzend benutzen.

Dieses Gerät verwendet einen Li-Ionen-Akku. Werfen Sie die Batterie nicht weg, wenn sie ersetzt werden muss, sondern befolgen Sie die in Ihrer Umgebung geltenden Vorschriften zum Entsorgen. Sie können die Batterie auch an den Zulieferer des Allora zurückgeben.

Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie es mit geladenem Akku auf und stellen Sie sicher, dass das Gerät abgeschaltet ist. (Drücken Sie dazu 5 Sekunden lang auf den Ein/Aus-Schalter.)

Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Wärmequellen oder an Stellen, an denen es besonders heiß werden kann. Beispielsweise entwickelt sich im Sommer in Autos große Hitze. Hohe Temperaturen können sich nachteilig auf den Betrieb des Geräts und die Lebensdauer der Batterie auswirken.

Das Allora ist nicht wasserdicht, aber das Gerät wurde so entwickelt, dass es auf der Seite der Tastatur gegen Spritzwasser geschützt ist. Die Lautsprecheröffnungen, durch die Feuchtigkeit oder Schmutzpartikel eindringen können, befinden sich auf der Unterseite des Geräts. Sollte Wasser in die Öffnungen der Lautsprecher eindringen, kann sich dies ihre Funktionsfähigkeit und die Tonqualität beeinträchtigen. Ergreifen Sie beim Reinigen des Allora Sicherheitsmaßnahmen und befolgen Sie die Reinigungsanleitung.

3 - So schalten Sie das Allora ein/aus.

Drücken Sie auf dem Allora kurz die Ein/Aus-Taste . Diese Taste befindet sich oben in der rechten Ecke der Tastatur. Das Hochfahren nimmt ungefähr 25 Sekunden in Anspruch. Während des Startvorgangs blinkt die Ein/Aus-Anzeige langsam. Bleibt die Betriebsanzeige grün, wurde das Gerät vollständig hochgefahren und ist zur Verwendung bereit, sobald der Cursor auf dem Bildschirm erscheint.

Sie können nun Ihre Nachricht auf der Tastatur eingeben. Drücken Sie die

Eingabetaste , um die Nachricht gesprochen zu hören.

Durch erneutes kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste wird das Allora in den Standby-Modus versetzt. Der Ein/Aus-Anzeiger blinkt nun alle 4 Sekunden. In diesem Modus ist der Energieverbrauch des Allora minimal. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um das Allora aus dem Standby-Modus zu wecken.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um das Allora vollständig auszuschalten.

3.1 Reset

Wird das Allora in einen inaktiven Zustand versetzt, (beispielsweise durch elektrostatische Entladung an einem Stecker), kann es durch Drücken der Reset-Taste zurückgesetzt werden. Das Gerät wird so zum Abschalten gezwungen; drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste erneut, um das Allora wieder zu starten.

Die Reset-Taste befindet sich auf der Unterseite des Geräts.



4 - 1. und 2. Anzeige

Das Allora verfügt über zwei grafische Anzeigen mit Buchstaben in unterschiedlichen Größen.

Die erste und größte Anzeige über der Tastatur stellt die Mitteilungen dar, die Sie tippen. Dieser Bildschirm zeigt Ihnen auch die Wort- oder Satzvorschläge. Rechts auf dem Bildschirm werden die Statusparameter angezeigt. Auf der Rückseite des Allora ist ein zweiter und kleinerer Bildschirm, der die Mitteilung anzeigt, die Sie tippen.



Der erste Bildschirm ist in drei Bereiche unterteilt. Der größte Bereich wird zum Schreiben der Mitteilungen verwendet. Eine Mitteilung kann mehrere Zeilen umfassen. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird die Mitteilung ausgesprochen. Sie müssen die Mitteilung nicht löschen, damit Sie eine neue Mitteilung schreiben können. Dies bedeutet, dass Sie problemlos zu Ihren vorherigen Mitteilungen zurückkehren können. Verwenden Sie die Pfeiltaste



verwenden möchten. Drücken Sie dann auf die 'Bestätigungs'-Taste , damit die gewählte Mitteilung gesprochen wird.

Der zweite Bereich auf dem Bildschirm unten auf der Anzeige ist durch eine waagrechte Linie vom ersten Bereich abgetrennt. In diesem Bereich des Bildschirms wird die Wort- oder Satzvorschläge angezeigt. Sie können aber auch festlegen, dass keine Vorschläge angezeigt werden und den gesamten Bildschirm zum Schreiben von Mitteilungen verwenden. Mithilfe der

Tastenkombination   können Sie zwischen 'Wortvorschläge', 'Satzvorschläge' oder 'keine Vorschläge' wechseln.

Der dritte Bereich des Bildschirms auf der rechten Seite zeigt die Statusparameter des Allora.

	Batteriestatus
	Stumm/nicht stumm
	Status der Fn- oder Umschalttaste
	neue Textnachricht

	GSM-Empfang
(S)	SMS-Modus

Die zweite und kleinere Anzeige auf der Rückseite des Allora zeigt die Mitteilung, die Sie schreiben. Sie können jedoch auch festlegen, dass nur die vollständige Mitteilung angezeigt wird, dann wenn die Mitteilung gesprochen wird.




Auf diesem Bildschirm haben Sie die Wahl 1, 2 oder 3 Zeilen darzustellen. Dadurch wird auch die Größe der Buchstaben bestimmt. Wird eine Textzeile gewählt, erscheinen größere Buchstaben; es werden jedoch weniger Buchstaben gleichzeitig dargestellt. Mehr Textzeilen bedingen kleinere Buchstaben.

Die zweite Anzeige ist normalerweise am Allora befestigt, sie ist jedoch auch abnehmbar und kann dadurch günstiger positioniert werden, sodass mehrere Personen die Anzeige sehen können.

Sie können die zweite Anzeige auch tragen oder Ihrem Kommunikationspartner geben. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sich in einer geräuschreichen Umgebung aufhalten oder wenn Sie eine private Unterhaltung führen möchten.


Um die zweite Anzeige vom Allora zu trennen, drücken Sie den Hebel hinter der Anzeige weg von der Anzeige und nehmen die Anzeige aus dem Einschub.

Es empfiehlt sich nicht, die zweite Anzeige während des Startvorgangs vom Allora zu trennen oder am Allora zu befestigen. Sie sollten stets abwarten, bis das Gerät vollständig hochgefahren wurde.

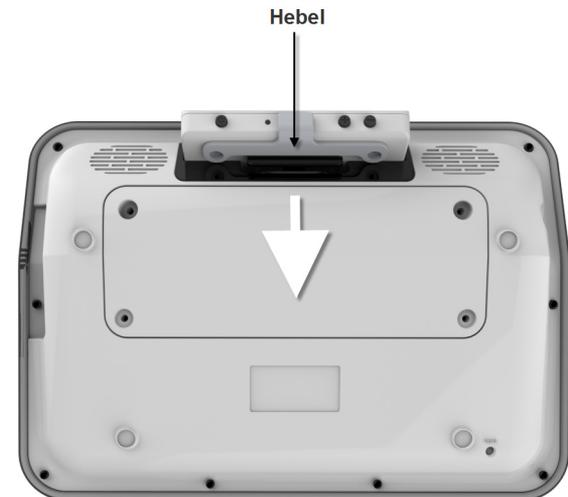

Sobald die zweite Anzeige vom Allora getrennt wurde, wird eine drahtlose Verbindung zwischen dem Gerät und der zweiten Anzeige hergestellt. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und benutzt werden kann, hören Sie einen kurzen Piepton. Text und Ton werden über die zweite Anzeige ausgegeben.


Der zweite Bildschirm kann mit einem Trageband mitgeführt werden oder es kann auf seinen zwei Standfüßen auf einen Tisch gestellt werden. Diese beiden Standfüße bewirken auch, dass der zweite Bildschirm leicht rückwärts geneigt ist und der Ton den Zuhörer problemlos erreicht.

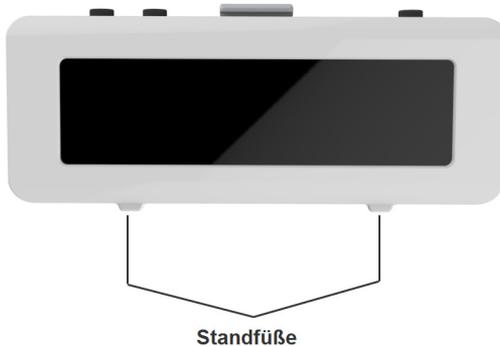

Um eine zuverlässige drahtlose Verbindung herzustellen, sollte ein Abstand von rund 3 Meter zwischen der zweiten Anzeige und dem Allora bestehen.

So setzen Sie die zweite Anzeige wieder in das Allora ein: Nehmen Sie die Anzeige und schieben Sie sie mit den Standfüßen oben in den Einschub des

Allora, so wie im folgenden Bild gezeigt. Die Verbindung mit dem Allora ist nur dann hergestellt, wenn Sie ein Klicken hören.

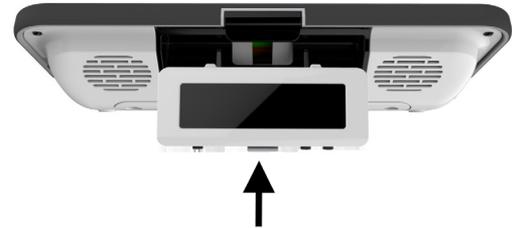

5.1 Funktionstaste

Die Funktionstaste Fn wird stets in Kombination mit einer anderen Taste verwendet. Drücken Sie beispielsweise die Funktionstaste und dann die Zahlentaste 1, um das Ausrufezeichen darzustellen. Um eine Kombination aus Tasten zu aktivieren, müssen Sie die Funktionstaste nicht gedrückt halten. Sie können die Taste lösen und dann auf die 1 drücken, um das Ausrufezeichen anzuzeigen. Ähnlich können Sie sämtliche Sonderzeichen (in Blau) in der linken oberen Ecke der Zahlentasten wählen.

Die blauen Symbole auf einigen Tasten stellen eine Funktion dar, die aktiviert werden kann, wenn die Taste in Kombination mit der Funktionstaste Fn verwendet wird. Darüber hinaus sind jedoch auch Kombinationen mit anderen Tasten, die kein zusätzliches blaues Symbol aufweisen, möglich.

Die folgende Liste zeigt Ihnen einen Überblick über die weiteren Kombinationen mit Funktionstasten.

Tabelle 1: Funktionstaste – Kombination

		Erhöhen der Lautstärke.
		Verringern der Lautstärke.
		Wechsel zum Allora-Menü "Einstellungen".
		Ton stumm/nicht stumm
		Hinzufügen des aktuellen Satzes zur Satzvorhersageliste.

Tabelle 1: Funktionstaste – Kombination

	 	Löschen des vorhergesagten Satzes, der aus der Satzvorhersageliste angezeigt wird.
		Datum ansagen.
		Uhrzeit ansagen.
		Zeichengröße erhöhen. Ist die maximale Größe erreicht, erfolgt mit dem nächsten Schritt der Einstellung wieder die Anzeige der kleinsten Größe und dann fortlaufend ansteigend erneut jede weitere.
	 	Zeichengröße verringern. Ist die minimale Größe erreicht, erfolgt mit dem nächsten Schritt der Einstellung wieder die Anzeige der maximalen Größe und dann fortlaufend absteigend erneut jede weitere.
		Ein- oder Ausschalten der zweiten Anzeige- Diese Einstellung bleibt gespeichert, bis sie erneut geändert wird.
		Wechseln zwischen der Tonwiedergabe von der zweiten Anzeige oder vom Allora. (Dies ist nur möglich, wenn die zweite Anzeige vom Gerät getrennt wurde.) Diese Einstellung bleibt gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Tabelle 1: Funktionstaste – Kombination

		Wechsel zwischen Wortvorhersage, Satzvorhersage und keiner Vorhersage. Diese Einstellung bleibt gespeichert, bis sie erneut geändert wird.
		Anzeige des Akkuzustands, des Status der zweiten Anzeige und der Version der Firmware.
		Anzeige des Telekommunikationsanbieters, der Signalstärke des Telefonbetriebs (nur SMS) und des freien Speicherplatzes für Textnachrichten.

5.2 Tontaste

Unterdrückung der Tonwiedergabe. Diese Funktion ist hilfreich, wenn ein Fehler unterläuft.

5.3 Mitteilungen-Taste

Mithilfe der 'Mitteilungen'-Taste werden gespeicherte Mitteilungen erneut aufgerufen. Drücken Sie zuerst auf die 'Mitteilungen'-Taste und dann auf eine Zahl oder einen Buchstaben. Die mit der entsprechenden Taste verknüpfte Mitteilung wird aufgerufen. Dies gilt auch für die Kombinationen:

- 'Mitteilungen'-Taste + Fn + Zahl oder Buchstabe,
- 'Mitteilungen'-Taste + Umschalttaste + Zahl oder Buchstabe,
- 'Mitteilungen'-Taste + Fn + Umschalttaste + Zahl oder Buchstabe.

Um eine Mitteilung unter einer Taste zu speichern, geben Sie zunächst die

gewünschte Mitteilung ein. Drücken Sie dann die 'Mitteilungen'-Taste  zwei Mal und dann die Zahl oder den Buchstaben, unter der/dem die Mitteilung

gespeichert werden soll. Drücken Sie dann 'bestätigen'  oder falls Sie sich

geirrt haben, 'ignorieren' . Sie können auch die folgenden Kombinationen zum Speichern von Mitteilungen verwenden:

- Fn + Zahl oder Buchstabe,
- Umschalten + Zahl oder Buchstabe,
- Fn + Umschalten + Zahl oder Buchstabe.

5.4 Tontaste

Mithilfe der 'Ton'-Taste werden gespeicherte Töne und Aufnahmen wiedergegeben. Drücken Sie zunächst die Tontaste und dann eine Zahl oder einen Buchstaben, um die damit verknüpfte Aufnahme abzuspielen. Dies gilt auch für die Kombinationen:

- Tontaste + Fn + Zahl oder Buchstabe,
- Tontaste + Umschalttaste + Zahl oder Buchstabe,
- Tontaste + Fn + Umschalttaste + Zahl oder Buchstabe.

Durch zweimaliges Drücken der Tontaste erfolgt der Ton 'Achtung'.

Weiter Informationen zu Tonaufnahmen finden Sie unter "Aufnahmen" auf Seite 31.

5.5 Pfeiltaste (aufwärts)

Bewegt den Cursor eine Zeile nach oben, oder erhöht die Lautstärke (in Verbindung mit der Fn-Taste).

5.6 Pfeiltaste (abwärts)

Bewegt den Cursor eine Zeile nach unten, oder verringert die Lautstärke (in Verbindung mit der Fn-Taste).

5.7 Pfeiltaste (links)

Bewegt den Cursor um eine Position nach links.

5.8 Pfeiltaste (rechts)

Bewegt den Cursor um eine Position nach rechts.

5.9 Bestätigungstaste

Drücken Sie die 'Bestätigungs'-Taste, um die Mitteilung an der Cursor-Position auszusprechen oder zu wiederholen. Oder bestätigen Sie eine Auswahl (in den Einstellungen oder in den Anwendungen).

Drücken Sie die Umschalttaste + , um alle Mitteilungen anzusagen, die seit der Ausführung des letzten Befehls 'Bildschirm löschen' erzeugt wurden.

5.10 Löschen- bzw. Ignorieren-Taste

Löscht den Bildschirm oder ignoriert eine Aktion oder eine Auswahl (in den Einstellungen oder in den Anwendungen).

5.11 Programmtaste

Drücken Sie die 'Programm'-Taste, um die Liste der auf dem Allora verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

Abhängig von den vorgegebenen Optionen und den Benutzerrechten, kommen folgende Anwendungen in Frage:

- Neue Mitteilung (Option): um eine neue Textnachricht zu erstellen
- Mitteilung lesen (Option): um eine Textnachricht zu lesen
- Aufnahme: um eine Tonaufnahme vorzunehmen
- IR-Umgebungssteuerung
- Adressbuch (Option)
- Notizen: für die Erstellung von Notizen
- Kommunikation: Grundanwendung

Wenn Sie nicht mit Ihrer bevorzugten Kommunikationsanwendung arbeiten (Sie verwenden ein anderes Programm oder Sie verändern die Einstellungen),

können Sie mithilfe der Taste  zur Kommunikationsanwendung zurückkehren. (siehe "Stern" auf Seite 58.)

Drücken Sie die Tastenkombination Fn + , um zum Menü "Einstellungen" des Allora zu wechseln.

5.12 Favoritentaste

Drücken Sie die 'Favoriten'-Taste, um die entsprechende Anwendung sofort zu starten. Diese Taste kann auch mit der Funktionstaste Fn und der Umschalttaste kombiniert werden, um zwei weitere bevorzugte Anwendungen zu starten.

5.13 Ein/Aus-Schalter

Weitere Informationen darüber wie Sie das Allora ein- oder ausschalten finden Sie unter "So schalten Sie das Allora ein/aus." auf Seite 7.

5.14 Korrekturtaste

Drücken Sie die 'Korrektur'-Taste, um Ihren letzten Eintrag zu löschen.

5.15 Eingabetaste

Drücken Sie die 'Eingabe'-Taste, um eine neue Zeile oder Mitteilung zu beginnen.

Ist der Parameter für die Sprachausgabe 'Enter-Echo' aktiviert, (Standardeinstellung), wird die Mitteilung auch gesprochen.

5.16 Umschalttaste

Drücken Sie die 'Umschalt'-Taste, um die Buchstaben groß zu schreiben. Umschalttaste muss dazu nicht gedrückt gehalten werden.

Die Umschalttaste wird auch für bestimmte Kombinationen verwendet.

Weitere nützliche Kombinationen sind:

 + Zahl 1..5, damit die entsprechenden Wortvorhersagen gesprochen werden.

  um die letzte gelöschte Mitteilung wiederherzustellen.

  Ansage aller Mitteilungen, die seit dem letzten Löschen des Bildschirms eingegeben wurden.

6 - Anschlüsse und Anzeigen



1. Mikrofon 2. Batterieladeanzeige 3. Ein/aus-Anzeige 4. Infrarot-Venster

6.1 Vorderseite

6.1.1 Mikrofon

Das integrierte Mikrofon liefert Aufnahmen in Höchstqualität. Für die Aufnahmen brauchen nicht näher an das Mikrofon heranzutreten. Halten Sie einen Abstand von ungefähr 20 cm ein und sprechen Sie mit normaler Lautstärke.

6.1.2 Batterieladeanzeige

Die Anzeige 'Batterie lädt' leuchtet auf, sobald das Anschlusskabel an die Steckdose angesteckt wurde. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige orange. Sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Anzeige grün. Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das im Lieferumfang mit dem Allora enthaltene.

6.1.3 Ein/Aus-Anzeige

Die Ein/Aus-Anzeige gibt den Betriebszustand des Allora an. Die Anzeige leuchtet nicht auf, wenn das Allora vollständig ausgeschaltet wurde.

Das Allora kann jedoch auch im Schlafmodus (Standby-Modus) sein, In diesem Fall blinkt die Ein/Aus-Anzeige alle 4 Sekunden auf, um seine Bereitschaft anzuzeigen, wenn Sie kommunizieren möchten.

Beim Einschalten und während des Startvorgangs blinkt die Betriebsanzeige. Dies kann bis zu 25 Sekunden dauern. Die Ein/Aus-Anzeige leuchtet weiterhin, wenn der Startvorgang beendet wurde und das Allora betriebsbereit ist.


Es empfiehlt sich nicht, während des Startvorgangs die zweite Anzeige vom Allora zu trennen oder am Allora zu befestigen. Sie sollten damit warten, bis das Gerät vollständig hochgefahren wurde, oder bis sich das Allora sich im Standby-Modus befindet.

Blinkt die Betriebsanzeige rot, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken, um das Gerät zu starten, muss die Batterie gewechselt werden.

6.1.4 Infrarot-Fenster

Das Infrarot-Fenster wird zum Erlernen der IR-Codes verwendet, Halten Sie die Fernsteuerung des Gerätes, von dem ein Befehl erlernt werden soll, während des IR-Code-Lernvorgangs ungefähr 5 cm entfernt vom Infrarot-Fenster.

6.2 Seite

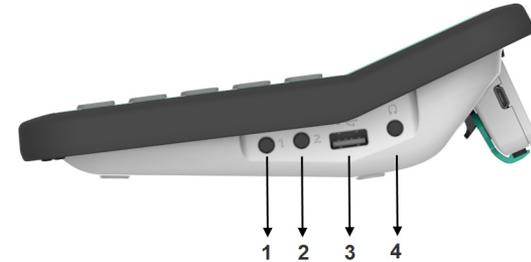

1. Schalter 1 2. Schalter 2 3. USB-Anschluss 4. Kopfhörer

6.2.1 Schalter 1

Verwenden Sie diesen Eingang, um Schalter 1 mit dem Allora zu verbinden und das Gerät mit einem Scan-Algorithmus für einen Schalter zu steuern.

6.2.2 Schalter 2

Verwenden Sie diesen Eingang, um Schalter 2 mit dem Allora zu verbinden und das Gerät mit einem Scan-Algorithmus für zwei Schalter zu steuern.

6.2.3 USB-Anschluss

Dieser USB-Anschluss dient dem Austausch von Notizen oder um Daten mithilfe eines USB-Sticks zu sichern oder wiederherzustellen. Dieser Port hat keine weitere Funktion.

6.2.4 Kopfhörer

Dieser Eingang wird zum Anschluss von Kopfhörern verwendet.

6.2.5 Netzteil-Anschluss

Der Eingang für das Netzteil befindet sich an der linken, gegenüberliegenden Seite. Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das im Lieferumfang mit dem Allora enthaltene. Der Adapter lädt die interne Batterie des Allora ebenso wie die Batterie der zweiten Anzeige (wenn diese mit dem Allora verbunden ist).

6.3 Rückseite

Auf der Unterseite des Gerätes befinden sich die Batteriefachabdeckung und die Reset-Taste.



Das Allora verfügt über einen Akku (wiederaufladbare Batterie). Diese Batterie wird über den mit dem Gerät mitgelieferten Adapter aufgeladen. Im Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes finden Sie den Anschluss für die SIM-Karte. Das Batteriefach sollte nur dann geöffnet werden, wenn die Batterie ersetzt werden muss oder wenn eine SIM-Karte eingeführt oder ersetzt werden muss. Verwenden Sie einen speziellen Schraubenzieher, um das Batteriefach zu öffnen (Torx TX10).

Die Reset-Taste ermöglicht ein erzwungenes Herunterfahren des Allora, falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Allora neu zu starten.



1. Batteriefachabdeckung 2. Reset-Taste

6.4 Die zweite Anzeige

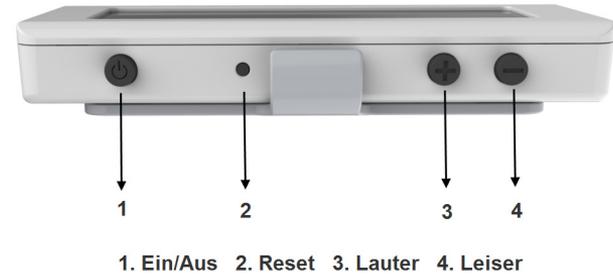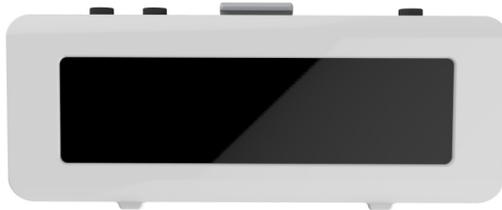

Das Allora verfügt über eine zweite Anzeige, auf der die Mitteilung erscheint, die aktuell eingegeben wird. Sie können jedoch auch festlegen, dass die vollständige Mitteilung nur dann angezeigt wird, wenn die Mitteilung gesprochen wird.

Sie haben die Auswahl zwischen 1, 2 oder 3 Textzeilen. Wenn Sie 1 Textzeile wählen, werden die Buchstaben größer dargestellt. Es können dann jedoch nur weniger Buchstaben gleichzeitig angezeigt werden. Wenn Sie 3 Textzeilen wählen, sind die Buchstaben kleiner.

Die zweite Anzeige ist am Allora befestigt, kann aber auch vom Gerät getrennt werden. Getippte Mitteilungen und Ton werden beide unterstützt, auch wenn die zweite Anzeige vom Gerät getrennt wurde.

Die zweite Anzeige verfügt über eine Anzahl an Steuerungstasten. Diese Steuerungstasten werden erst dann aktiviert, wenn die zweite Anzeige vom Hauptgerät getrennt wurde.

6.4.1 Ein/Aus

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um zur zweiten Anzeige zu wechseln (oder ca. 3 Sekunden, um sie abzuschalten, wenn sie aktiv ist). Dies ist nur erforderlich, wenn die zweite Anzeige vom Allora getrennt wurde. Sobald die zweite Anzeige angeschaltet ist, wird eine drahtlose Verbindung zwischen dem Allora und der zweiten Anzeige hergestellt. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, hören Sie einen Piepton. Auf der zweiten Anzeige erscheint außerdem kurz darauf ein Symbol, das die Verbindung bestätigt.

6.4.2 Reset

Falls die zweite Anzeige nicht mehr reagiert, drücken Sie die Reset-Taste, um das Abschalten der Anzeige zu erzwingen. Die Reset-Taste wird aktiviert, indem man mit einem spitzen Gegenstand, beispielsweise einer Kugelschreiberspitze darauf drückt, Drücken Sie die Taste sanft, bis ein 'Klicken' zu hören ist. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste, um die Anzeige erneut einzuschalten.

6.4.3 Lauter

Diese Taste dient dazu, die Lautstärke der zweiten Anzeige zu erhöhen. Gleichzeitig wird die Einstellung der Lautstärke auf dem Allora verändert. Die Lautstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6.4.4 Leiser

Diese Taste dient dazu, die Lautstärke der zweiten Anzeige zu verringern. Gleichzeitig wird die Einstellung der Lautstärke auf dem Allora verändert. Die Lautstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Anschluss auf der Seite der zweiten Anzeige wird ausschließlich für die Wartung benötigt.

Drücken Sie gleichzeitig ganz kurz die Taste 'Leiser' und die An/Aus-Taste, um die Statusparameter der zweiten Anzeige darzustellen: Die Seriennummer, die Mac-Adresse (die Identifikationsadresse für die Drahtlosverbindung), die Softwareversion und den Batteriestatus.

7 - Batterien

Das Allora ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku (Batterie) ausgerüstet. Mit einer neuen vollständig geladenen Batterie liefert das Allora 10 Stunden fortlaufend Ton und Sprachsynthese. Die Batteriekapazität in Kombination mit den Energiesparmodi des Gerätes müssten ausreichen, um die Benutzung für einen ganzen Tag lang zu ermöglichen, bevor erneutes Laden erforderlich ist.

Stecken Sie das Netzteil an, um die Batterie im Gerät zu laden, Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das im Lieferumfang mit dem Allora enthaltene.

Sie können das Allora während des Ladevorgangs weiterhin benutzen, auch wenn dann das vollständige Laden der Batterie länger dauert.

Die Anzeige für das Batterieladen wechselt von orange auf grün, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Das Netzteil kann angesteckt bleiben. Es empfiehlt sich, die Stromversorgung vom Gerät zu trennen, um unnötige Unfälle, beispielsweise das Ziehen am Stromkabel zu vermeiden.

Die zweite Batterie besitzt ebenfalls eine integrierte aufladbare Batterie. Diese Batterie wird durch das Allora geladen, sobald die zweite Anzeige am Allora befestigt wurde.

Drücken Sie gleichzeitig die Taste 'Leiser' und die An/Aus-Taste, um die Statusparameter der zweiten Anzeige darzustellen: Die Seriennummer, die Mac-Adresse (die Identifikationsadresse für die Drahtlosverbindung), die Softwareversion und den Batteriestatus.

7.1 Austausch der Batterie des Allora

Die Batterie befindet sich im Batteriefach des Allora. Die Batteriefachabdeckung ist mit speziellen Schrauben befestigt. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung nur wenn dies notwendig ist und verwenden Sie dazu das richtige Werkzeug, einen Torx-Schraubenzieher (Torx TX 10).

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät vollständig auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass das Allora von der Stromversorgung getrennt ist.

Legen Sie das Allora mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Oberfläche, sodass die Bildschirmoberfläche nicht beschädigt wird.

Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher Torx TX 10. Ziehen Sie die Batterieabdeckung von den Schraubenlöchern weg vom Gehäuse. Die Batterie ist nun sichtbar und kann aus dem Gerät entnommen werden. Führen Sie die neue Batterie in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig positioniert ist und dass ein Kontakt hergestellt wurde. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, es darf keine Gewalt angewendet werden.

Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf. Auch hier darf keine Gewalt angewendet werden.

Verwenden sie den Schraubenzieher Torx TX 10, um die Batterieabdeckung wieder zu befestigen, aber ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

7.2 Austausch der Batterie in der zweiten Anzeige

Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Batterie der zweiten Anzeige zu ersetzen.

Werfen Sie die ausgetauschte Batterie nicht einfach weg, sondern befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung vor Ort. Geben Sie ansonsten die Batterie an den Vertriebs Händler des Gerätes zurück.

8 - Allora-Anwendungen

Das Allora unterstützt verschiedene Anwendungen. Abhängig von den vorgegebenen Optionen und den Benutzerrechten, kommen folgende Anwendungen in Frage:

- Neue Mitteilung (Option): um eine neue Textnachricht zu erstellen
- Mitteilung lesen (Option): um eine Textnachricht zu lesen
- Aufnahme: um eine Tonaufnahme vorzunehmen
- IR-Umgebungssteuerung
- Adressbuch (Option)
- Notizen: für die Erstellung von Notizen
- Kommunikation: Grundanwendung

8.1 Kommunikation

Die Grundanwendung des Allora besteht im Schreiben und in der Sprachsynthese von Mitteilungen mit einem direkten Kommunikationspartner. Das Allora startet stets mit diesem Programm. Wenn Sie in einem anderen Programm arbeiten oder wenn Sie die Einstellungen des Allora angepasst

haben, dann können Sie durch Drücken der Programmtaste  zur Kommunikationsanwendung zurückkehren.

Um eine Mitteilung zu erstellen, tippen Sie Ihre Mitteilung einfach auf der Tastatur des Allora ein.

Sie können eines der Wörter auswählen, die (im unteren Bildschirmbereich) in der Wortvorhersageliste erscheinen, indem Sie die entsprechenden Zahlen 1 bis 5 auswählen. Die Liste enthält nie mehr als 5 Wörter.

Um die Satzvorhersage zu verwenden, drücken Sie die Taste mit der 1, um den vorhergesagten Satz auszuwählen. Drücken Sie 2, um den nächsten Satz (falls vorhanden) auszuwählen.

Um Zahlen einzugeben, halten Sie die Zahlentasten etwas länger gedrückt, bis sie auf dem Bildschirm erscheinen.

Drücken Sie die Eingabetaste , um eine neue Zeile oder Mitteilung zu beginnen. Soll das Aussprechen der Mitteilung durch Drücken der Eingabetaste nicht initiiert werden, deaktivieren Sie in den Sprachparametern 'Enter-Echo'.

Sie können auch die Bestätigungstaste  verwenden, damit die Mitteilung in der Cursor befindet, gesprochen wird.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um die Zeichengröße zu erhöhen.

Wenn Sie eine neue Mitteilung schreiben möchten, müssen Sie die vorhandene Mitteilung nicht entfernen. Sie können die Mitteilungen Ihrer Unterhaltung behalten und jederzeit wieder auf eine davon zugreifen. Verwenden Sie dazu die

Pfeiltaste  oder . Drücken Sie die Bestätigungstaste, damit die gewählte Mitteilung gesprochen wird.

Drücken Sie die Tastenkombination  , damit sämtliche Mitteilungen gesprochen werden.

Drücken Sie die Taste , um sämtliche Mitteilungen zu löschen. Sollten Sie Ihre Mitteilungen versehentlich gelöscht haben, können Sie diese

wiederherstellen. Drücken Sie dazu die Tastenkombination  .

Über die Tastenkombination   haben Sie die Auswahl zwischen 'Wortvorhersage', 'Satzvorhersage' und 'keine Vorhersage'.

8.1.1 So speichern Sie Mitteilungen

1. Mitteilungen zur Liste der Satzvorhersagen hinzufügen

Drücken Sie zunächst die Taste , um sämtliche Mitteilungen zu löschen. Schreiben Sie dann Ihre Mitteilung und drücken Sie die Tastenkombination

 . Sie hören einen kurzen Ton, der bestätigt, dass der Satz zur Liste mit Satzvorhersagen hinzugefügt wurde.

Verwenden Sie die Tastenkombination   , um den Satz, der im Vorhersagebereich angezeigt wird, aus der Liste der Satzvorhersagen zu löschen.

2. Mitteilungen 'unter einer Taste' speichern

Drücken Sie zunächst die Taste , um sämtliche Mitteilungen zu löschen. Schreiben Sie dann Ihre Mitteilung und drücken Sie zwei Mal die Mitteilungs-

Taste , und danach einen Buchstaben oder eine Zahl. Bestätigen Sie mit , wenn die Mitteilung mit dem gewählten Buchstaben oder der gewählten

Zahl verknüpft werden soll. Drücken Sie auf , um die Auswahl zu ignorieren.

Sie können auch die folgenden Tastenkombinationen zum Speichern von Mitteilungen verwenden:

- Fn + Zahl oder Buchstabe,
- Umschalten + Zahl oder Buchstabe,
- Fn + Umschalten + Zahl oder Buchstabe.

Um eine Mitteilung erneut aufzurufen, drücken Sie zuerst die 'Mitteilungen'-

Taste , und dann auf eine Zahl oder einen Buchstaben. Die mit der entsprechenden Taste verknüpfte Mitteilung wird dann auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können nun nach Belieben hinzufügen oder ändern. Drücken Sie

dann die Bestätigungstaste , damit die Eingabe gesprochen wird.

Sollen Mitteilungen sofort gesprochen werden, nachdem sie erneut aufgerufen wurden, aktivieren Sie den Parameter 'Mem-Nachricht lesen' (siehe "Mem-Nachricht lesen" auf Seite 58).

Dies gilt auch für die Tastenkombinationen:

- 'Mitteilungen'-Taste + Fn + Zahl oder Buchstabe,
- 'Mitteilungen'-Taste + Umschalttaste + Zahl oder Buchstabe,
- 'Mitteilungen'-Taste + Fn + Umschalttaste + Zahl oder Buchstabe.

3. Abkürzungen für Mitteilungen verwenden

Sie können Ihren Mitteilungen auch Abkürzungen zuweisen. Mithilfe der Ersetzung von Abkürzungen ersetzt das Allora Ihre Abkürzung, sobald Sie danach ein Leerzeichen eingeben, durch einen vollständigen Satz.

Um eine Abkürzung zu erstellen, geben Sie zunächst Ihre Mitteilung ein.

Drücken Sie dann zwei Mal die Mitteilungen-Taste , gefolgt von der gewünschten Abkürzung. Bestätigen Sie mit , wenn die Mitteilung mit der Abkürzung verknüpft werden soll. Drücken Sie auf , um die Auswahl zu ignorieren.

Um die Mitteilung erneut aufzurufen, geben Sie einfach die Abkürzung ein und drücken Sie die Leertaste.

8.2 Aufnahmen

Das Allora verfügt über ein integriertes Mikrofon, das es Ihnen ermöglicht, auf einfache Weise Stimmaufnahmen zu erstellen.

Drücken Sie die 'Programm'-Taste , um die verfügbaren Programme anzuzeigen und wählen Sie "Aufnahme". Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabetaste, um die Aufnahme zu beginnen. Befolgen Sie diese Anleitungen:

1. Wählen Sie ein Zeichen, das Sie mit der Aufnahme verknüpfen möchten.
2. Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt. Die Aufnahme beginnt nach 2 Sekunden.
3. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, wie Ihre Aufnahme dauert.
4. Lassen Sie die Taste los, um die Aufnahme zu beenden. Der Bildschirm zeigt an "Aufnahme beendet". Schließen Sie den Bildschirm mit der Kreuztaste.

Drücken Sie die Eingabetaste , erneut, um die Aufnahme zu hören. Um die Aufnahme nochmals vorzunehmen, halten Sie die Taste erneut gedrückt.

Um eine Aufnahme in der Kommunikationsanwendung abzuspielen, drücken Sie die Tontaste und danach das Zeichen, das mit dem Ton oder der Aufnahme, den oder die Sie abspielen möchten, verknüpft ist.

Zum Speichern einer Aufnahme können Sie auch die folgenden Tastenkombinationen verwenden:

- Fn + Zahl oder Buchstabe,
- Umschalten + Zahl oder Buchstabe,
- Fn + Umschalten + Zahl oder Buchstabe.

8.3 Notizen erstellen

Mit Ihrem Allora können Sie Notizen machen. Notizen können auf dem Gerät oder auf einem USB-Stick gespeichert und auf einen Computer übertragen werden. Ebenso können Sie Notizen oder Unterhaltungen auf einem Computer vorbereiten und auf das Allora übertragen. Der Austausch der Daten zwischen dem Allora und einem Computer erfolgt über einen USB-Stick.

8.3.1 Notizen erstellen

Um eine Notiz zu erstellen, löschen Sie mit der Taste  den Bildschirm. Sie können nun Ihre Notiz schreiben. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine neue Zeile zu beginnen. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird der vorherige Satz automatisch ausgesprochen. Dies können Sie unterbinden, indem Sie in den Spracheinstellungen 'Enter-Echo' deaktivieren oder indem Sie das Allora über

die Tastenkombination   auf stumm stellen.

Um eine Notiz zu speichern, drücken Sie die Programmtaste , wählen Sie dann 'Notizen' und drücken Sie die Eingabetaste.

Folgende Auswahl ist dann verfügbar:

8.3.2 Notiz speichern

Die Notiz wird im integrierten Speicher des Allora gespeichert. Bei diesem Vorgang werden Sie aufgefordert, der Notiz einen Namen zu geben.

8.3.3 Notiz öffnen

Wählen Sie diese Option, um eine auf dem Allora gespeicherte Notiz zu öffnen. Eine Liste der gespeicherten Notizen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zu derjenigen Notiz zu navigieren, die Sie öffnen möchten. Drücken Sie dann die Eingabetaste. Die Notiz wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können die Notiz bearbeiten oder zu einem Satz navigieren, der ausgesprochen werden soll. Drücken Sie dann die Eingabetaste .

8.3.4 Notiz speichern (USB)

Wählen Sie diese Option, um die Notiz auf einem USB-Stick zu speichern. Sie werden aufgefordert, der Notiz einen Namen zu geben.

8.3.5 Notiz öffnen (USB)

Wählen Sie diese Option, um eine auf einem USB-Stick gespeicherte Notiz zu öffnen. Eine Liste der gespeicherten Notizen wird auf dem Bildschirm

angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zu derjenigen Notiz zu navigieren, die Sie öffnen möchten. Drücken Sie dann die Eingabetaste. Die Notiz wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können die Notiz bearbeiten oder zu einem Satz navigieren, der ausgesprochen werden soll. Drücken Sie dann die Eingabetaste .

8.3.6 Notiz löschen

Wählen Sie diese Option, um eine auf dem integrierten Speicher des Allora gespeicherte Notiz zu löschen. Eine Liste der gespeicherten Notizen wird auf

dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zu derjenigen Notiz zu navigieren, die Sie löschen möchten. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um eine Auswahl zu treffen. Drücken Sie die Taste  um zu bestätigen, oder die Taste  um die Auswahl zu ignorieren.

8.4 Umgebungssteuerung

Wenn Ihr Allora mit einem ECU-Modul (Environment Control Unit, Umgebungssteuerung) ausgestattet ist, können Sie mithilfe des Allora IR-Codes übertragen, um weitere Geräte, wie Fernseher, CD-Player oder sogar Lampen, Türen und Fenster zu steuern. Dies ist nur dann möglich, wenn diese von einer IR-Steuerung unterstützt werden und wenn das ECU des Allora ihre IR-Codes erkennt.

8.4.1 So nehmen Sie die IR-Codes auf

Auf der rechten Bildschirmseite unterhalb der Ein/Aus-Anzeige befindet sich ein violettes Fenster. Durch dieses Fenster nimmt das Allora die IR-Codes auf. Bitte denken Sie daran, dass einige Geräte über sehr komplexe IR-Codes verfügen. In solchen Fällen kann es möglich sein, dass die Codes nicht erlernt werden können.



Drücken Sie die Programmtaste , um die verfügbaren Anwendungen anzuzeigen. Wählen Sie die Umgebungssteuerung und drücken Sie die Eingabetaste.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

1. Senden
2. Lernen
3. Backup (via USB)
4. Wiederherstellen (via USB)

Drücken Sie die 2, um 'Lernen' auszuwählen.

Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Speicherplätze (Befehle), die einen IR-Code haben können: gw1 .. gw150.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , wählen Sie einen der Befehle aus und drücken Sie die Eingabetaste, um den Lernvorgang zu starten:

Zunächst werden Sie gefragt, ob Sie den bestehenden Code überschreiben

möchten. Drücken Sie die Eingabetaste , wenn der bestehende Code überschrieben und ein neuer Code erlernt werden soll. Drücken Sie die Taste

, wenn Sie dies nicht möchten.

Legen Sie die Fernsteuerung des Gerätes mit dem zu erlernenden IR-Code in einem Abstand von ungefähr 5 cm neben das violette Fenster und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste mit dem Befehl, der erlernt werden soll. Halten Sie diese Taste gedrückt, bis das Allora anzeigt, dass Sie die Taste lösen können.

Das Allora wird Sie auffordern, diesen Vorgang zu wiederholen. Halten Sie demnach dieselbe Taste ein zweites Mal gedrückt, bis das Allora anzeigt, dass sie gelöst werden kann.

Sie können nun dem Befehl einen bestimmten Namen zuweisen, beispielsweise 'Lauter', 'TV an'... Sie sollten möglichst einen kurzen Namen wählen, der den Befehl beschreibt.

8.4.2 Übertragung der IR-Codes

Drücken Sie die Programmtaste , um die verfügbaren Anwendungen anzuzeigen. Wählen Sie die Umgebungssteuerung und drücken Sie die Eingabetaste.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

1. Senden
2. Lernen
3. Backup (via USB)

4. Wiederherstellen (via USB)

Drücken Sie die 1, um 'Senden' auszuwählen.

Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Speicherplätze (Befehle), die einen IR-Code haben können: gw1 .. gw150. Einigen der Befehle wurde möglicherweise während des Lernvorgangs ein anderer Name zugewiesen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um denjenigen Befehl zu wählen, den Sie ausführen möchten. Drücken Sie dann die Eingabetaste

. Der IR-Code wird nun übertragen.

Für 111 der 150 Gewa-Befehle gibt es auch eine Verknüpfung mit einer Taste oder einer Tastenkombination. Ist die entsprechende Taste oder Tastenkombination bekannt, kann sie direkt eingegeben werden.

8.5 Textnachrichten senden und empfangen

Das Allora kann mit einem GSM-Modul ausgerüstet werden, das es Ihnen erlaubt, Textnachrichten zu übertragen und von einer anderen Person zu empfangen. Ist Ihr Allora mit diesem Modul ausgerüstet, muss die Anwendung initiiert werden, bevor Sie sie verwenden können. Führen Sie dazu die folgenden 3 Schritte durch: Installieren Sie die SIM-Karte, geben Sie den entsprechenden PIN-Code ein und stellen Sie zuletzt eine Verbindung mit einem Telekommunikationsanbieter her.

8.5.1 Installieren der SIM-Karte

Die SIM-Karte ist ein kleiner Chip, der in das Allora eingesetzt werden muss, damit das GSM-Modul verwendet werden kann.




Der SIM-Kartensteckplatz befindet sich im Batteriefach des Allora.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um das Gerät vollständig auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass das Allora von der Stromversorgung getrennt ist.

Legen Sie das Allora mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Oberfläche, sodass der Bildschirm nicht beschädigt wird.

Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher Torx TX 10. Ziehen Sie die Batterieabdeckung von den Schraubenlöchern weg vom Gehäuse. Die Batterie ist nun sichtbar und kann aus dem Gerät entnommen werden.

Das folgende Bild zeigt die Stelle für die SIM-Karte.

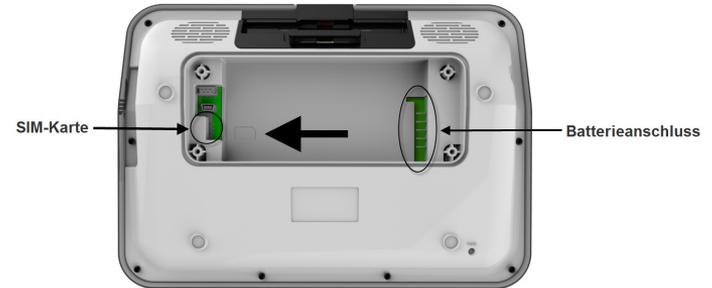

Im Batteriefach sieht man ein kleines Bild, das die korrekte Position der SIM-Karte anzeigt. Schieben Sie die SIM-Karte sanft in Pfeilrichtung in den SIM-Kartenhalter.

Legen Sie die Batterie zurück in das Batteriefach. Schieben Sie zuerst die linke Seite der Batterie (neben der SIM-Karte) in das Fach und lassen Sie dann die andere Seite der Batterie in den Batterieanschluss einrasten. Damit wird sichergestellt, dass sowohl die SIM-Karte als auch die Batterie guten Kontakt haben.

8.5.2 PIN-Code eingeben

Sobald die SIM-Karte eingelegt wurde, kann der PIN-Code eingegeben werden.

Drücken Sie die Fn-Taste und , um die "Einstellungen" des Allora zu öffnen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zum Eintrag 'Handy' zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste. Sie haben nun das Einstellungs Menü des Handy-Moduls von Allora aufgerufen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zum Eintrag 'PIN-Code' zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste. Das folgende Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste 

oder drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu verwerfen.

8.5.3 Verbindung zu einem Telekommunikationsanbieter

Nachdem der PIN-Code korrekt eingegeben wurde, kann nun eine Verbindung mit einem Telekommunikationsanbieter hergestellt werden.

Drücken Sie die Fn-Taste , um die "Einstellungen" des Allora zu öffnen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zum Eintrag 'Handy' zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste. Sie haben nun das Einstellungs Menü des Handy-Moduls von Allora aufgerufen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zum Eintrag '(Erneut) verbinden' zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Statussymbol für die Signalstärke  auf der rechten Seite auf der Anzeige.

Die Tastenkombination   ermöglicht die Prüfung der Signalstärke, des Telekommunikationsanbieters und des verfügbaren Speicherplatzes auf der SIM-Karte. Bitte denken Sie daran, dass ohne ausreichend Speicherplatz auf der SIM-Karte der Empfang neuer Textnachrichten nicht möglich ist. Sollte dies der Fall sein, können Sie alte Textnachrichten löschen und so Speicherplatz freigeben.


8.5.4 So senden Sie eine Textnachricht.

Eine gute Vorgehensweise ist, zunächst eine Kontaktliste zu erstellen.

Um Ihre Kontaktliste zu öffnen, drücken Sie auf die Programmtaste , um die verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zum Eintrag '5 - Adressbuch' zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste .

Das folgende Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt:

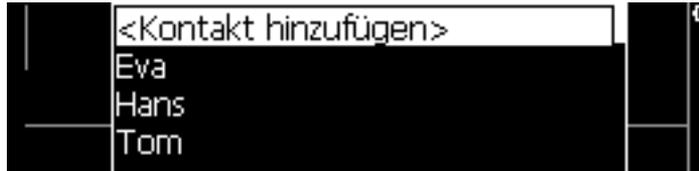

Wählen Sie <Kontakt hinzufügen> und drücken Sie , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

Geben Sie den Namen und die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit der

Bestätigungstaste  oder drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu verwerfen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Kontakte hinzuzufügen.

Wenn Sie einen bestehenden Kontakt auswählen, können Sie ihn bearbeiten oder löschen.

Drücken Sie die Taste  oder , um zur Kommunikationsanwendung zurückzukehren.

Sie können nun mit dem Schreiben von Textnachrichten beginnen. Drücken Sie die Programmtaste, um die verfügbaren Anwendungen anzuzeigen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zum Eintrag '1 - Neue Nachricht' zu navigieren und drücken Sie die Eingabetaste.

Ein leerer Bildschirm wird angezeigt und die Textnachricht kann geschrieben werden. Im Statusbereich der Anzeige erinnert ein Symbol (S) daran, dass Sie sich im Textnachrichten-Modus befinden.

Wenn die Textnachricht bereit zum Senden ist, drücken Sie die

Bestätigungstaste . Ihre Kontaktliste erscheint auf dem Bildschirm. Geben Sie direkt eine Telefonnummer ein oder verwenden Sie die Pfeiltaste

 oder , um einen Kontakt aus der Liste auszuwählen.

Drücken Sie auf die Eingabetaste , um die Nachricht zu senden. Sie hören dann einen Ton und sehen 'Nachricht versendet', wenn die Nachricht erfolgreich versendet wurde.

Drücken Sie erneut die Bestätigungstaste , wenn Sie die Nachricht einer weiteren Kontaktperson senden möchten.

Drücken Sie die Programmtaste , um zur Kommunikationsanwendung zurückzukehren.

8.5.5 Textnachrichten erhalten

Sobald Sie eine Textnachricht von jemandem erhalten, erscheint ein Symbol mit einem Briefumschlag im Statusfenster. Sie können außerdem auch einen Ton

hören. Denken Sie daran, dass das Briefumschlag-Symbol auch anzeigen kann, dass neue Nachrichten vorhanden sind, die Sie noch nicht gelesen haben.

Um eine neue Nachricht zu lesen, drücken Sie die Programmtaste  und wählen 'Nachrichten lesen'. Eine Liste mit Nachrichten erscheint auf dem Bildschirm, wobei die neueste Nachricht ganz oben angezeigt wird.

Die erste Zeile zeigt den Namen des Senders an, die zweite Zeile zeigt den Anfang der Nachricht. Eine Markierung mit einem Stern * vor dem Namen des Senders bedeutet, dass diese Nachricht ungelesen ist.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um zu derjenigen Nachricht zu navigieren, die Sie lesen möchten. Drücken Sie dann die Eingabetaste , um die Nachricht zu öffnen.

Die vollständige Nachricht wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt.



Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um in der Nachricht zu navigieren.

Sie können sehen, dass der Sender, das Datum und die Uhrzeit der Nachricht am Ende der Nachricht angezeigt werden. Sie können nun wählen, ob Sie die Nachricht sofort beantworten (drücken Sie die Zahlentaste 1=Antworten) oder

löschen (drücken Sie die Zahlentaste 2= Entfernen) oder laut lesen lassen möchten (drücken Sie die Zahlentaste 3= Lesen).

Die Textnachricht wird auf der SIM-Karte und im integrierten Speicher des Allora gespeichert. Die SIM-Karte speichert die neuesten fünf Nachrichten, alle weiteren Nachrichten werden im integrierten Speicher des Allora gespeichert.

9 - So wird das Allora mithilfe von Schaltern bedient.

Das Allora kann auch über 1 oder 2 Schalter bedient werden. Das Allora zeigt dann Zeichen und Funktionen am Bildschirm an, die Sie verwenden können, um eine Mitteilung zu erstellen. Wenn das Zeichen oder die Abfolge von Zeichen mit dem gewünschten Zeichen erscheint, drücken Sie den Schalter, um Ihre Auswahl zu treffen. Diese Vorgehensweise wird Scan-Vorgang genannt.

Um Sie durch den Scan-Vorgang zu leiten, zeigt das Allora eine Folge alphanumerischer Zeichen an, aus denen Sie eine Auswahl treffen und einen Satz oder eine Mitteilung erstellen können. Diese Zeichenfolgen werden im unteren Teil des Bildschirms angezeigt, dort, wo normalerweise die Wortvorhersagen erscheinen. In einem weiteren Algorithmus sind die Zeichenfolgen nicht wie die Zeichenreihen der Tastatur organisiert sondern in effektiverer Anordnung. Es gibt die folgenden zwei Formate, die Sie zum Scannen verwenden können:

1. Tastatur-Scannen Reihe für Reihe.

Der Bildschirm zeigt abwechselnd jede Zeichenreihe der Tastatur. Mithilfe des Schalters können Sie die Reihe auswählen, in der sich das gewünschte Zeichen befindet und dann zu diesem Buchstaben scannen. Nachdem eine Auswahl getroffen wurde, startet der Scan-Vorgang erneut.

2. Herkömmlicher Buchstaben-Scan.


In diesem Format werden die angezeigten Buchstaben gemäß ihrer Häufigkeit angeordnet, beispielsweise Buchstaben wie Vokale und häufig benutzte Konsonanten werden zuerst zur Auswahl gestellt und dann folgen die weniger häufigen Konsonanten in den folgenden Zeilen. Dies ermöglicht ein effizienteres Durchsuchen, das heißt, beim Zusammensetzen der Mitteilung wird Zeit gespart.

9.1 Bearbeitung mit einem Schalter

Wird ein Schalter verwendet, erfolgt der Durchlauf automatisch in einem bestimmten Takt.


Stecken Sie einen Schalter an Schaltereingang 1 des Allora an (bitte bedenken Sie, dass der Scan-Vorgang automatisch beginnt, sobald der Schalter angesteckt wird) und legen Sie die richtigen Parameter fest wie folgt:

Drücken Sie die Tastenkombination  . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

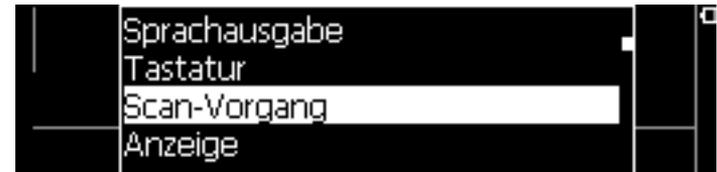

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Eintrag "Scan-

Vorgang" auszuwählen und aktivieren Sie ihn mit der Eingabetaste . Die folgende Parameterliste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

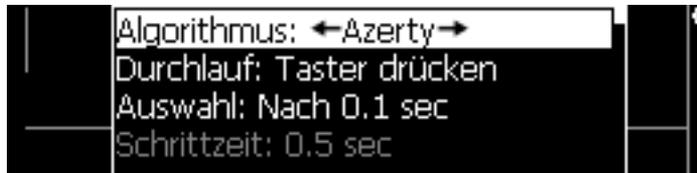

Wählen Sie zunächst den Parameter **Algorithmus**. Wenn Sie eine QWERTY-Tastatur verwenden, ist es auch sinnvoll Qwerty zu wählen, es ist jedoch auch ein anderer Algorithmus verfügbar: Alphabet. Dieser Algorithmus durchsucht nicht die Reihen der Tastatur, sondern setzt eine effizientere Abfolge von Zeichen und Funktionen.

Legen Sie den Parameter **Durchlauf** auf 'Automatisch' fest. Dies bedeutet, dass das Allora die verschiedenen Sequenzen des Scan-Algorithmus automatisch durchläuft. Wenn das Zeichen oder die Abfolge von Zeichen mit dem gewünschten Zeichen erscheint, drücken Sie den Schalter, um Ihre Auswahl zu treffen.

Der Parameter **Auswahl** erlaubt die Wahl zwischen Drücken ('Beim Drücken') oder Lösen des Schalters ('Beim Lösen') oder durch Halten des Schalters über einen bestimmten Zeitraum. Durch Festlegen einer Haltezeit vermeiden Sie unerwünschte Tastenanschläge.

Die **Schrittzeit** definiert die Geschwindigkeit oder den Takt, mit dem das Allora die einzelnen Abläufe durchläuft.

Falls Sie einen Fehler machen und beispielsweise eine Reihe mit Zeichen wählen, in der Ihr gewünschtes Zeichen nicht auftaucht, können Sie einfach abwarten, bis das Allora diese Reihe einige Male durchlaufen hat und dann diese 'falsche Reihe' verlässt. Der Parameter **Reihe verlassen** legt fest, wie oft das Allora eine Reihe durchläuft, bevor es sie verlässt.

Scan-Pause legt die Anzahl der Durchläufe fest, die das Allora durchführt, bis der Algorithmus gestoppt wird, vorausgesetzt, es gab während dieses Intervalls keine Schalteraktivität. Durch Drücken des Schalters wird der Scan-Vorgang automatisch wieder aufgenommen.

Sie können festlegen, dass jede erneute Auswahl verzögert wird, sobald ein bestimmtes Zeichen oder eine bestimmte Funktion ausgewählt wurde. Damit werden unerwünschte aufeinander folgende Auswahlen vermieden, die beispielsweise durch Zucken oder Zittern entstehen können.

Der Parameter **Verzögerung** legt diese Verzögerungszeit fest.

Das Allora kann die Anzeige jedes folgenden Zeichens oder jeder nächsten Zeichenfolge mit einem kurzen Ton begleiten. Dies kann helfen, dem Durchlauftakt besser zu folgen. **Ton an/aus** fügt jedem Schritt einen Ton zu oder unterdrückt ihn.


Drücken Sie , um den Scan-Vorgang zu stoppen. Drücken Sie Schalter &, um den Scan-Vorgang erneut zu starten.

9.2 Zugriff auf 2 Schalter


Verwenden Sie Schalter 1, um die aufeinander folgenden Sequenzen des Scan-Algorithmus zu durchlaufen. Verwenden Sie Schalter 2, um Ihre Auswahl zu treffen.

Stecken Sie die Schalter an die entsprechenden Schaltereingänge des Allora. Der Scan-Vorgang startet automatisch, sobald Sie Schalter 1 aktivieren.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um die richtigen Parameter festzulegen. Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

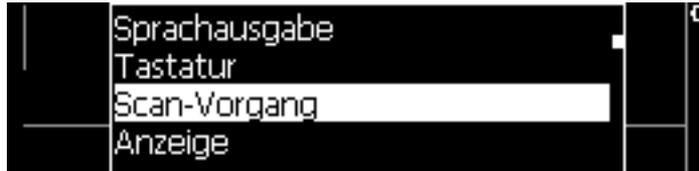

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder  um den Eintrag "Scan-Vorgang" auszuwählen und aktivieren Sie ihn mit der Eingabetaste . Die folgende Parameterliste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

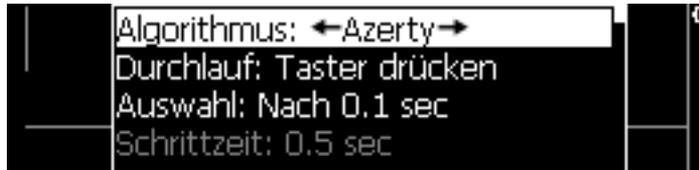

Wählen Sie zunächst den Parameter **Algorithmus**. Wenn Sie eine QWERTY-Tastatur verwenden, ist es auch sinnvoll Qwerty zu wählen, es ist jedoch auch ein anderer Algorithmus verfügbar: Alphabet. Dieser Algorithmus durchsucht nicht die Reihen der Tastatur, sondern setzt eine effizientere Abfolge von Zeichen und Funktionen.

Legen Sie den Parameter **Durchlauf** auf 'Taster drücken' fest. Dies bedeutet, dass das Allora die nächsten Sequenzen anzeigt, wenn Sie Schalter 1 aktivieren.

Wenn das Zeichen oder die Abfolge von Zeichen mit dem gewünschten Zeichen erscheint, drücken Sie Schalter 2, um Ihre Auswahl zu treffen.

Der Parameter **Auswahl** erlaubt die Wahl zwischen Drücken ('Beim Drücken') oder Lösen des Schalters ('Beim Lösen') oder durch Halten des Schalters über einen bestimmten Zeitraum. Durch Festlegen einer Haltezeit vermeiden Sie unerwünschte Tastenanschläge.

Falls Sie einen Fehler machen und beispielsweise eine Reihe mit Zeichen wählen, in der Ihr gewünschtes Zeichen nicht auftaucht, können Sie einfach abwarten, bis das Allora diese Reihe einige Male durchlaufen hat und dann diese 'falsche Reihe' verlässt. Der Parameter **Reihe verlassen** legt fest, wie oft das Allora eine Reihe durchläuft, bevor es sie verlässt.

Scan-Pause legt die Anzahl der Durchläufe fest, die das Allora durchführt, bis der Algorithmus gestoppt wird, vorausgesetzt, es gab während dieses Intervalls keine Schalteraktivität. Durch Drücken des Schalters wird der Scan-Vorgang automatisch wieder aufgenommen.

Sie können festlegen, dass jede erneute Auswahl verzögert wird, sobald ein bestimmtes Zeichen oder eine bestimmte Funktion ausgewählt wurde. Damit werden unerwünschte aufeinander folgende Auswahlen vermieden, die beispielsweise durch Zucken oder Zittern entstehen können.


Der Parameter **Verzögerung** legt diese Verzögerungszeit fest.

Das Allora kann die Anzeige jedes folgenden Zeichens oder jeder nächsten Zeichenfolge mit einem kurzen Ton begleiten. Dies kann helfen, dem Durchlauftakt besser zu folgen. **Ton an/aus** fügt jedem Schritt einen Ton zu oder unterdrückt ihn.

Drücken Sie , um den Scan-Vorgang zu stoppen. Drücken Sie Schalter 1, um den Scan-Vorgang erneut zu starten.

10 - Überblick über das Menü und die verschiedenen Einstellungen

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" des Allora zu öffnen. Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

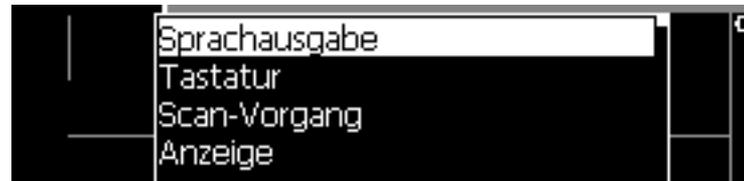

Sie können das Menü "Einstellungen" jederzeit wieder verlassen, indem Sie die Programmtaste  drücken.

In der folgenden Übersicht werden die verschiedenen Tasten beschrieben, mit deren Hilfe Sie die Parameter ändern können:


 oder 	Damit navigieren Sie in der Liste der angezeigten Parameter oder Untermenüs.
 oder 	Damit wählen Sie ein Untermenü aus.
 oder 	Damit ändern Sie den Wert eines Parameters.

	Damit verlassen Sie ein Untermenü.
	Damit kehren Sie zur Kommunikationsanwendung zurück und die Änderungen werden angewendet.

10.1 Sprachausgabe

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Sprachausgabe" und drücken Sie die Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

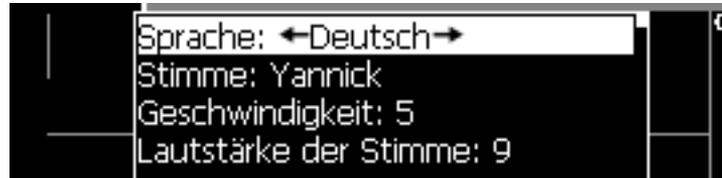

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.1.1 Sprache

Wählen Sie eine der verschiedenen Sprachen aus, die auf Ihrem Allora verfügbar sind.

10.1.2 Stimme

Wählen Sie eine der verschiedenen Stimmen aus, die für eine bestimmte Sprache verfügbar sind.

10.1.3 Geschwindigkeit

Legen Sie die Sprechgeschwindigkeit fest. Je höher die Zahl, umso schneller ist die

Sprechgeschwindigkeit.

10.1.4 Lautstärke der Stimme

Dies ist die Lautstärke der ausgewählten Stimme. Die Lautstärke kann je nach der Sprache, der Stimme und der angewendeten

Sprachtechnologie variieren. Diese Lautstärke sollte nur ein Mal festgelegt werden. Stärke 7 ist eine gute

Auswahl. Sie können diese Lautstärke erhöhen, falls es wirklich erforderlich ist. In einigen

Fällen kann dies zu einer Stimmverzerrung führen.

10.1.5 Allgemeine Lautstärke

Dies ist die Lautstärkeeinstellung des Allora. Dieser Parameter kann auch mithilfe

der Tastenkombinationen geändert werden, und zwar mit  , um die

Lautstärke zu erhöhen, oder mit  , um die Lautstärke zu verringern.

10.1.6 Zeichen-Echo

Wird dieser Parameter aktiviert, spricht das Allora jedes eingegebene Zeichen aus.

10.1.7 Wort-Echo

Wird dieser Parameter aktiviert, spricht das Allora jedes eingegebene Wort aus (sobald ein Leerzeichen gesetzt wird).

10.1.8 Enter-Echo

Eine getippte Nachricht wird ausgesprochen, sobald die Eingabetaste  gedrückt wird. Ist diese Einstellung deaktiviert, können Sie immer noch die


Bestätigungstaste  verwenden, um die Nachricht, an der Position des Cursors auszusprechen.

Verwenden Sie die Tastenkombination  , um sämtliche Mitteilungen auszusprechen, die nach einem Befehl zum Löschen des Bildschirms eingetippt wurden.


10.1.9 Aussprache hinzufügen

Wird ein bestimmtes Wort nicht korrekt ausgesprochen, kann es einem Aussprachewörterbuch im Allora hinzugefügt werden.

Drücken Sie auf , um ein Wort hinzuzufügen:

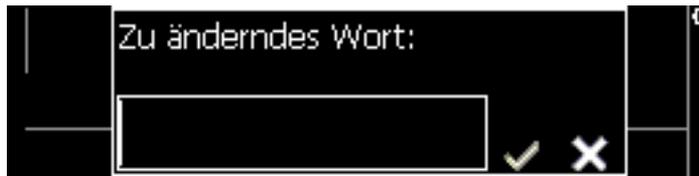

Schreiben Sie dann das Wort erneut und auf eine Weise, die eine bessere Aussprache ergibt.

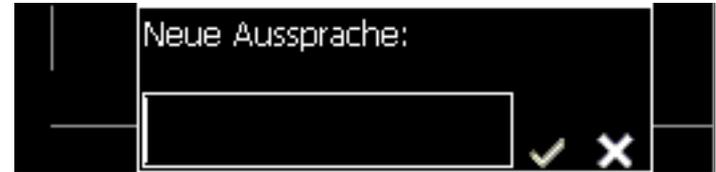

Drücken Sie auf , um das Ergebnis anzunehmen oder auf , um abzubrechen.

10.1.10 Aussprache entfernen

Drücken Sie auf , um die Liste mit den Wörtern aus dem Wörterbuch anzuzeigen. Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um ein Wort auszuwählen und drücken Sie dann auf die Eingabetaste .

Drücken Sie auf , um es aus dem Wörterbuch zu löschen, oder drücken Sie auf , um abzubrechen.

10.1.11 Tastatur

Drücken Sie auf die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Tastatur" und drücken Sie auf die Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.1.12 Typ

Dieser Parameter legt das Tastaturlayout fest. Ändern Sie diesen Parameter nur, wenn die Tastatur nicht mit der Tastatur Ihres Allora übereinstimmt.

10.1.13 Ton

Legen Sie "Ton an" fest, wenn bei jedem Tastenanschlag ein Ton erfolgen soll.

10.1.14 Haltezeit für Nummern

Dieser Parameter legt fest, wie lange die Zahlentaste gehalten werden muss, damit die entsprechende Zahl in Ihrer Nachricht angezeigt wird.

Die Zahlentasten 1 bis 5 werden auch verwendet, um eine Wortvorhersage auszuwählen. Drücken Sie dazu die Zahlentasten ganz kurz.

10.1.15 Verzögerung

Um unerwünschte Tastenanschläge, beispielsweise durch ein Zucken oder Zittern zu verhindern, kann dieser Parameter so eingestellt werden, dass eine Verzögerungszeit festgelegt wird, bevor ein neuer Tastenanschlag angenommen wird.

10.1.16 Haltezeitverzögerung

Um versehentliche Tastenanschläge, beispielsweise durch

ein Zucken oder Zittern zu verhindern, kann dieser Parameter so eingestellt werden, dass festgelegt wird, wie lange eine Taste

gehalten werden muss, bevor sie angenommen wird.

Wichtiger Hinweis!

Bei diesen beiden Parametern kann durch die Einstellung auf einen bestimmten

Wert der Eindruck entstehen, dass das Allora nicht mehr

reagiert. Bitte denken Sie deshalb daran, dass die Tastatur sehr langsam reagieren wird,

nachdem Sie diese Verzögerungen auf bestimmte Zeiten festgelegt haben.

10.2 Scan-Vorgang

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Scan-Vorgang" aus und drücken Sie

die Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.2.1 Algorithmus

Dieser Parameter legt den Algorithmus fest, der verwendet werden soll, um die

Abfolgen in Schritten durchzuführen. Wenn Sie eine QWERTY-Tastatur haben, ist es möglicherweise zweckmäßig, Qwerty auszuwählen; es ist jedoch auch ein anderer Algorithmus verfügbar: Alphabet. Dieser Algorithmus durchsucht nicht

die Reihen der Tastatur, sondern benutzt eine effizientere Abfolge von Zeichen und Funktionen.

10.2.2 Durchlauf

Legen Sie diesen Parameter auf "Automatisch" fest, wenn Sie einen Schalter verwenden. Die Durchläufe werden automatisch in bestimmtem Abstand angezeigt (der Schrittzeit).

Wenn Sie 2 Schalter verwenden, sollte dieser Parameter auf "Taster drücken" festgelegt werden.

Dies bedeutet, dass das Allora die nächsten Sequenzen anzeigt, wenn Sie Schalter 1 aktivieren. Wenn das Zeichen oder die Abfolge von Zeichen mit dem gewünschten Zeichen erscheint, drücken Sie Schalter 2, um Ihre Auswahl zu treffen.

10.2.3 Auswahl

Der Parameter Auswahl erlaubt die Wahl zwischen Drücken ('Beim Drücken') oder Lösen des Schalters ('Beim Lösen') oder durch Halten des Schalters über einen bestimmten Zeitraum. Durch Festlegen einer Haltezeit vermeiden Sie unerwünschte Tastenanschläge.

10.2.4 Schrittzeit

Die 'Schrittzeit' definiert die Geschwindigkeit oder den Takt, mit dem das Allora die einzelnen Abläufe durchläuft.

10.2.5 Reihe verlassen

Dieser Parameter legt fest, wie oft das Allora eine Reihe durchläuft, bevor es sie verlässt (falls Sie einen Fehler gemacht und einen falschen Ablauf gewählt haben).

10.2.6 Scan-Pause

Dieser Parameter legt die Anzahl der Durchläufe fest, die das Allora durchführt, bis der Algorithmus gestoppt wird, vorausgesetzt, es gab während dieses Intervalls keine Schalteraktivität. Durch Drücken des Schalters wird der Scan-Vorgang automatisch wieder aufgenommen.

10.2.7 Verzögerung

Sie können festlegen, dass jede erneute Auswahl verzögert wird, sobald ein bestimmtes Zeichen oder eine bestimmte Funktion ausgewählt wurde. Damit werden unerwünschte aufeinander folgende Auswahlen vermieden, die beispielsweise durch Zucken oder Zittern entstehen können.


10.2.8 Ton

Das Allora kann die Anzeige jedes folgenden Zeichens oder jeder nächsten Zeichenfolge mit einem kurzen Ton begleiten (Ton = an). Dies kann helfen, dem Durchlauffakt besser zu folgen.

10.3 Anzeige

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Anzeige" und drücken Sie die

Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

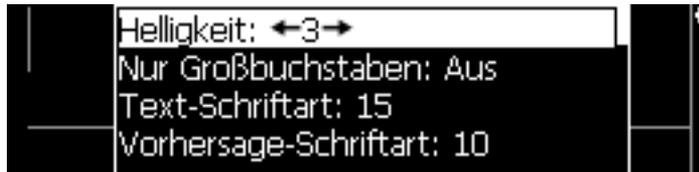

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.3.1 Helligkeit

Legen Sie die Helligkeit der ersten Anzeige auf 1, 2 oder 3 fest, um hellere Zeichen zu erhalten. Bitte denken Sie daran, dass stärkere Helligkeit mit größerem Energieverbrauch und verminderter Batterielebensdauer einhergeht.

10.3.2 Nur Großbuchstaben

Ist dieser Parameter festgelegt, zeigt das Allora auf der ersten Anzeige ausschließlich Großbuchstaben an.

10.3.3 Text-Schriftart

Der Parameter "Text-Schriftart" legt die Größe der Zeichen auf der Anzeige auf 7 bis 24 Pixel fest.

10.3.4 Vorhersage-Schriftart


Der Parameter "Vorhersage-Schriftart" legt die Größe der Zeichen einer

Wort- oder Satzvorsage auf der Anzeige auf 7 bis 24 Pixel fest. Beachten Sie, dass nicht beide Schriftarten die maximale Größen haben können. Die Anzeige verändert sich entsprechend den Einstellungen, so dass Sie ein Optimum wählen können.

10.4 Zweite Anzeige

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Anzeige" und drücken Sie die

Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

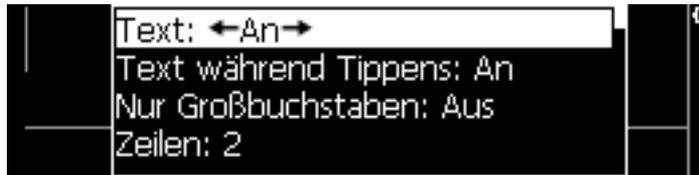

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.4.1 Text

Ist der Parameter "Text" deaktiviert, dann zeigt die zweite Anzeige die Nachricht nicht an.

10.4.2 Text während Tippens

Soll die Nachricht während Ihrer Eingabe auf der zweiten Anzeige nicht erscheinen, müssen Sie diesen Parameter auf 'aus' festlegen. Die Nachricht wird auf der zweiten Anzeige erst dann erscheinen, wenn das Allora sie ausspricht.

10.4.3 Nur Großbuchstaben

Ist dieser Parameter festgelegt, werden die Zeichen auf der zweiten Anzeige ausschließlich in Großbuchstaben angezeigt.

10.4.4 Zeilen

Dieser Parameter legt fest, wie viele Textzeilen die zweite Anzeige unterstützt. Sie haben die Auswahl zwischen 1, 2 oder 3 Zeilen. Je mehr Textzeilen Sie wählen, um so kleiner werden die angezeigten Buchstaben.

10.4.5 Audio

Die zweite Anzeige verfügt über kleine Lautsprecher. Diese Lautsprecher werden normalerweise aktiviert, sobald die zweite Anzeige vom Allora getrennt und eine drahtlose Verbindung hergestellt wurde. Sie können jedoch auch festlegen, dass die Tonwiedergabe weiterhin über die Lautsprecher des Allora (Ton = aus) erfolgt.

10.4.6 Blättern – Typ

Dieser Parameter legt fest, wie die Nachricht auf der zweiten Anzeige erscheint, während sie ausgesprochen wird.

'Typewriter' bedeutet, dass die Wörter der Nachricht Wort für Wort auf der zweiten Anzeige erscheinen, synchron mit der Sprachausgabe.

Wird 'Untertitel' eingestellt, wird die zweite Anzeige so viele Wörter wie möglich anzeigen, synchron mit der Sprachausgabe.

10.5 Vorhersage

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Vorhersage" und drücken Sie die

Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.5.1 Vorhersage

Sie haben die Auswahl zwischen 'Wortvorhersage', 'Satzvorhersage' und 'keine Vorhersage'.


Unter "Wortvorhersage" kann das Allora maximal 5 Wörter vorhersagen. Drücken Sie die Zahlentasten 1 bis 5, um das entsprechende Wort auszuwählen.

Wenn Sie die Satzvorhersage verwenden möchten, drücken Sie die Zahlentaste 1, um den Satz auszusuchen und die Zahlentaste 2, um den nächsten Satz anzuzeigen (Falls verfügbar).

10.5.2 Wort hinzufügen

Wählen Sie diesen Parameter, um ein neues Wort zur Vorhersage-Datenbank

hinzuzufügen. Drücken Sie die Eingabetaste . Das folgende Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt:

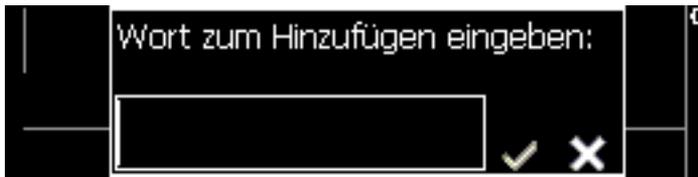


Tippen Sie das gewünschte Wort, um es zur Vorhersage-Datenbank hinzuzufügen.

Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste  oder , brechen Sie die Aktion ab, indem Sie die Eingabetaste  drücken.

10.5.3 Wort entfernen

Wählen Sie diesen Parameter, um ein Wort aus der Wortvorhersage-Datenbank

zu entfernen. Drücken Sie die Eingabetaste . Das folgende Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt:

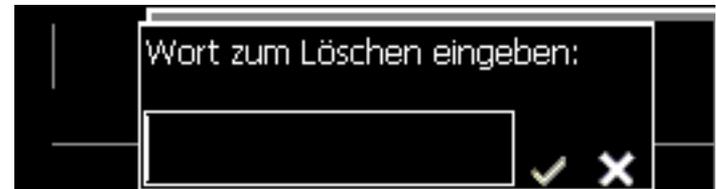

Geben Sie das Wort ein, das Sie aus Ihrer Liste mit Vorhersagen entfernen

möchten. Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste  brechen Sie die Aktion ab, indem Sie die Taste  drücken.

10.5.4 Autom. Lernen

Dieser Parameter legt fest, ob das Allora neue Wörter automatisch zur Wortvorhersage-Datenbank hinzufügen soll, oder nicht.

'Aus' bedeutet, dass keine neuen Wörter zur Datenbank hinzugefügt werden sollen.

'Wörter' bedeutet, dass das Allora, die von Ihnen eingegebenen Wörter automatisch zur Datenbank hinzufügt. Ist das Wort bereits vorhanden, dann wird

seine Häufigkeit angepasst (die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wort eingegeben wird).

'Häufigkeit' bedeutet, dass das Allora nur die Häufigkeit der Wörter und Wortpaare der vorhandenen Einträge in der Datenbank anpasst.

'Alle' bedeutet, dass das Allora neue Wörter automatisch zur Datenbank hinzufügt und außerdem die Häufigkeit der vorhandenen Einträge in der Datenbank entsprechend anpasst.

10.5.5 Groß-/Kleinschreibung

Wird dieser Parameter festgelegt, dann bezieht die Wortvorhersage auch die Großschreibung mit ein. Mit der Einstellung 'aus' bleibt die Vorhersage von der Großschreibung unbeeinflusst.

10.5.6 Max. Wiederholungen

Dieser Parameter legt fest, wie oft eine Vorhersage in der angezeigten Wortliste wiederholt wird, bevor es durch eine andere Vorhersage ersetzt wird.

10.5.7 Satzzeichenanpassung

Ist dieser Parameter festgelegt, wird nach jedem Satzzeichen automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

10.6 Datum/Uhrzeit

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Datum/Uhrzeit" und drücken Sie die Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.6.1 Datum ändern

Drücken Sie die Eingabetaste  und legen Sie das Jahr fest. Bestätigen

Sie mit der Bestätigungstaste  oder brechen Sie die Aktion ab, indem Sie

die Taste  drücken. Gehen Sie genauso vor, um den Monat (1-12) und den Tag (1-31) einzugeben. Am Ende des Vorgangs hören Sie jeweils einen kurzen Ton.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Datum zu hören. Das Datum ist auch auf der Anzeige zu sehen.

10.6.2 Uhrzeit ändern

Drücken Sie die Eingabetaste , und legen Sie die Stunde fest.

Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste  oder brechen Sie die Aktion ab,

indem Sie die Taste  drücken. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die Minuten einzustellen. Am Ende des Vorgangs hören Sie jeweils einen kurzen Ton.


Drücken Sie die Tastenkombination  , um die Zeit zu hören. Die Zeit ist auch auf der Anzeige zu sehen.

10.7 Handy

Wenn Ihr Allora mit einem GSM-Modul ausgerüstet ist, können Sie die es mit diesen Einstellungen initialisieren. Bitte denken Sie daran, dass dieses Modul nur das Senden und Empfangen von Textnachrichten unterstützt.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Handy" und drücken Sie die

Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

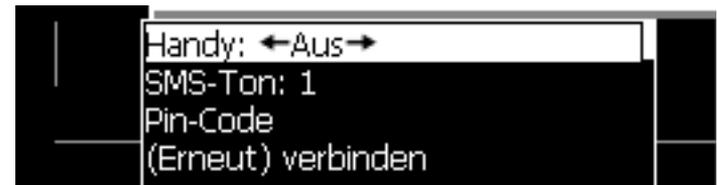

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

10.7.1 Handy

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, das Handy an- oder auszuschalten.

10.7.2 SMS-Ton

Wählen Sie den gewünschten Ton (1 bis 3), der beim Empfang einer Nachricht erklingen soll.

10.7.3 Pin-Code

Drücken Sie auf die Eingabetaste , um das Untermenü zu öffnen:



Geben Sie den mit Ihrer SIM-Karte verknüpften Pin-Code ein. Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste  oder brechen Sie die Aktion ab, indem Sie die Taste  drücken.

10.7.4 (Erneut) verbinden

Nachdem der Pin-Code eingegeben wurde, muss die Verbindung mit dem Telefonnetzwerk hergestellt werden. Sobald Sie das Allora dann das nächste Mal starten, wird dies automatisch ausgeführt (wenn der Parameter "Handy" auf 'an' festgelegt ist).


Wenn die Verbindung unterbrochen wurde, kann sie mit "(Erneut) verbinden" wiederhergestellt werden.

10.8 Allgemein

Die allgemeinen Einstellungen legen die Menüsprache, die Energieverwaltung, die bevorzugten Anwendungen usw. fest.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Allgemein" und drücken Sie die

Eingabetaste . Die folgende Liste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

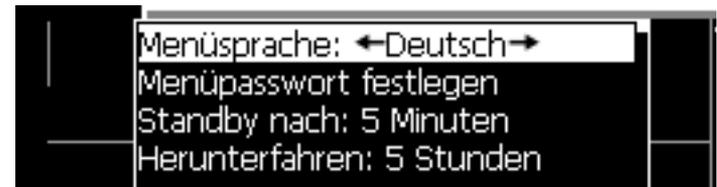

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü (falls verfügbar) zu öffnen.

Drücken Sie auf , um ein Untermenü zu verlassen.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Parameter beschrieben:

10.8.1 Menüsprache

Mithilfe dieses Parameters legen Sie die im Menü verwendete Sprache fest.

10.8.2 Menüpasswort festlegen

Legen Sie ein Passwort fest, um einen unbefugten Zugriff auf das Menü "Einstellungen" zu verhindern. Wenn Sie ein Passwort festgelegt haben, werden Sie bei jedem Versuch das Menü "Einstellungen" aufzurufen, danach gefragt.

Drücken Sie die Eingabetaste , um das Passwort festzulegen.



Bestätigen Sie mit der Bestätigungstaste  oder brechen Sie die Aktion ab, indem Sie die Taste  drücken.

Wie kann das Passwort entfernt werden?

Sobald Sie das Menü "Einstellungen" geöffnet haben, können Sie das aktuelle Passwort entfernen: Wählen Sie den Eintrag 'Allgemein' und dann 'Menüpasswort festlegen'. Bestätigen Sie, ohne Zeichen einzugeben. Sie können nun ohne ein Passwort auf das Menü "Einstellungen" zugreifen.

10.8.3 Standby nach

Wird das Allora eine Zeit lang nicht benutzt, wechselt es automatisch in einen Modus, in dem der Energieverbrauch

stark zurückgefahren wird, um die Lebensdauer der Batterie zu schonen. Dieser Modus wird Standby-Modus genannt.

Der Parameter "Standby nach" legt fest, nach wie vielen Minuten ohne Aktivität das Allora automatisch in

den Standby-Modus wechselt.

Bitte denken Sie daran, dass der Wechsel in den Standby-Modus auch durch kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste ausgelöst werden kann.

Sobald danach eine Taste gedrückt wird, wacht das Allora aus dem Standby-Modus auf.

10.8.4 Herunterfahren

Mit diesem Parameter können Sie festlegen, nach wie vielen Stunden das Allora automatisch heruntergefahren werden soll.

Nach dem automatischen Herunterfahren muss das Allora mithilfe des Ein/Aus-Schalters erneut gestartet werden.

10.8.5 Statusleiste

Wenn Sie die Einstellungen entsprechend festlegen zeigt das Allora die Statusparameter auf der rechten Seite der Anzeige. Die Statusparameter sind folgende:

Batterie, Stumm, Status der FN- und Umschalttaste, Nachrichten, SMS-Modus, Signalstärke.

10.8.6 Abkürzungen

Legen Sie diesen Parameter fest, um gespeicherte Abkürzungen automatisch vollständig anzuzeigen.

10.8.7 Aufnahme mit Geräuschfilter

Wenn Sie Aufnahmen in einer geräuschbelasteten Umgebung machen möchten, kann das Aktivieren des Geräuschfilters für bessere Aufnahmen sorgen.

10.8.8 Mem-Nachricht lesen

Wenn Sie eine Nachricht unter einer Taste gespeichert haben, können Sie diese



Nachricht erneut aufrufen indem Sie die Mitteilungen-Taste  und die entsprechende Taste drücken. Die Mitteilung ist dann auf der Anzeige zu sehen. Wenn der Parameter "Mem-Nachricht lesen" auf 'an' eingestellt ist, wird die Mitteilungen außerdem automatisch gesprochen.

10.8.9 Stern

Das Allora verfügt über eine besondere Taste, die Stern taste , mit deren Hilfe eine bevorzugte Anwendung geöffnet werden kann. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- <Keines>
- Aufnahme: um eine Tonaufnahme vorzunehmen
- Neue SMS: um eine neue Textnachricht zu erstellen
- SMS lesen: um eine Textnachricht zu lesen
- IR senden: um einen Befehl der Umgebungssteuerung zu senden
- Zeit ablesen: um die Zeit zu lesen
- Aufnahme (A): um die Aufnahme unter dem Buchstaben A zu hören
- Nachricht (A): um die Nachricht unter dem Buchstaben A zu hören

10.8.10 Umschalttaste Stern

Ähnlich der Sterntaste kann die Tastenkombination   ebenfalls mit einer Ihrer bevorzugten Anwendungen verknüpft werden.

10.8.11 Fn+Stern

Ähnlich der Sterntaste kann die Tastenkombination   ebenfalls mit einer Ihrer bevorzugten Anwendungen verknüpft werden.


10.8.12 Werkzeugmenü

Das Allora unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen. Die Hauptanwendung ist Kommunikation, aber Sie können auch Tonaufnahmen oder Notizen machen. Ihr Allora kann auch über zusätzliche Anwendungen verfügen, wenn es mit einem IR-Modul für die Umgebungssteuerung und/oder mit dem GSM-Modul ausgerüstet wurde, um SMS-Nachrichten zu empfangen. Mithilfe des Werkzeugmenüs können Sie auswählen, welche Anwendungen zugelassen werden. Nur diese Anwendungen werden dann angezeigt, wenn Sie auf die

Programmtaste  drücken.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Werkzeugmenü" und drücken Sie die

Eingabetaste . Die folgende Parameterliste wird auf dem Bildschirm angezeigt:

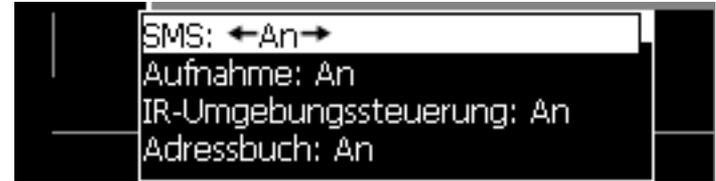

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um einen Parameter auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um den Wert eines Parameters zu ändern.

Legen Sie die Anwendungen, die zur Benutzung zugelassen werden sollen auf den Wert 'an' fest.

Die Anwendungen, die auf 'aus' festgelegt sind, erscheinen nicht in der Liste der Anwendungen, wenn Sie auf die Programmtaste  drücken.

10.8.13 Backup/Wiederherstellen

Mit dieser Funktion können sie Daten sichern und wiederherstellen, beispielsweise gespeicherte Mitteilungen, Tonaufnahmen und IR-Codes auf einem USB-Stick. Sollten aus irgendeinem Grund die Gerätedaten gelöscht werden (Verlust, Reparatur), können Sie Ihre Daten jederzeit mithilfe des USB-Sticks auf Ihrem Allora wiederherstellen.

Dieses Hilfsmittel kann auch verwendet werden, um ein Firmware-Update zu installieren oder um die werksseitigen Einstellungen wiederherzustellen.

Drücken Sie die Tastenkombination  , um das Menü "Einstellungen" anzuzeigen, wählen Sie "Backup/Wiederherstellen" und

drücken Sie die Eingabetaste . Die folgende Parameterliste wird auf dem Bildschirm angezeigt:



Verwenden Sie die Pfeiltaste  oder , um eine Vorgehensweise auszuwählen.

Drücken Sie auf , um den Vorgang zu starten.

Im folgenden Überblick werden die verschiedenen Vorgehensweisen beschrieben:

10.8.14 Vollständiges Backup erstellen

Damit wird ein vollständiges Backup von der Allora-Anwendungssoftware und den Daten zu erstellt. Stellen Sie sicher, dass ein USB-Speicherstick mit dem Allora verbunden ist.

10.8.15 Backup wiederherstellen

Damit wird das Backup vom USB-Stick wiederhergestellt. Stellen Sie sicher, dass ein USB-Speicherstick mit dem Allora verbunden ist.

10.8.16 Update installieren

Wenn eine neue Version der Allora-Anwendungssoftware verfügbar ist, können Sie diese Software zunächst auf einen Speicherstick speichern und dann mithilfe des Befehls "Update installieren" auf dem Allora installieren.

10.8.17 Daten-Backup erstellen

Damit werden nur die Allora-Daten, beispielsweise Aufnahmen oder gespeicherte Mitteilungen und IR-Codes, auf einem USB-Speicherstick gespeichert. Stellen Sie sicher, dass der USB-Speicherstick mit dem Allora verbunden ist.

10.8.18 Daten-Backup wiederherstellen

Kopieren Sie Ihre Allora-Daten von einem USB-Speicherstick zurück auf das Allora.

10.8.19 Werkseinstellungen wiederherstellen

Wählen Sie diese Option, um sämtliche Parameter auf die werkseigenen Einstellungen zurückzusetzen.

Damit werden auch die Allora-Speicherdaten gelöscht.

