SKU:00.5192~C 2026/08/31

Floorstand

- 17.1170 - **FS PentaFloat Tele**
- 17.1172 - **FS PentaFloat Eco**

MOUNTING MADE EASY

Scan me




Sicherheitshinweise
Safety Instructions

Montage
Assembly

Handhabung
Handling


Stückliste
Bill of Materials

VORSICHT / *CAUTION*

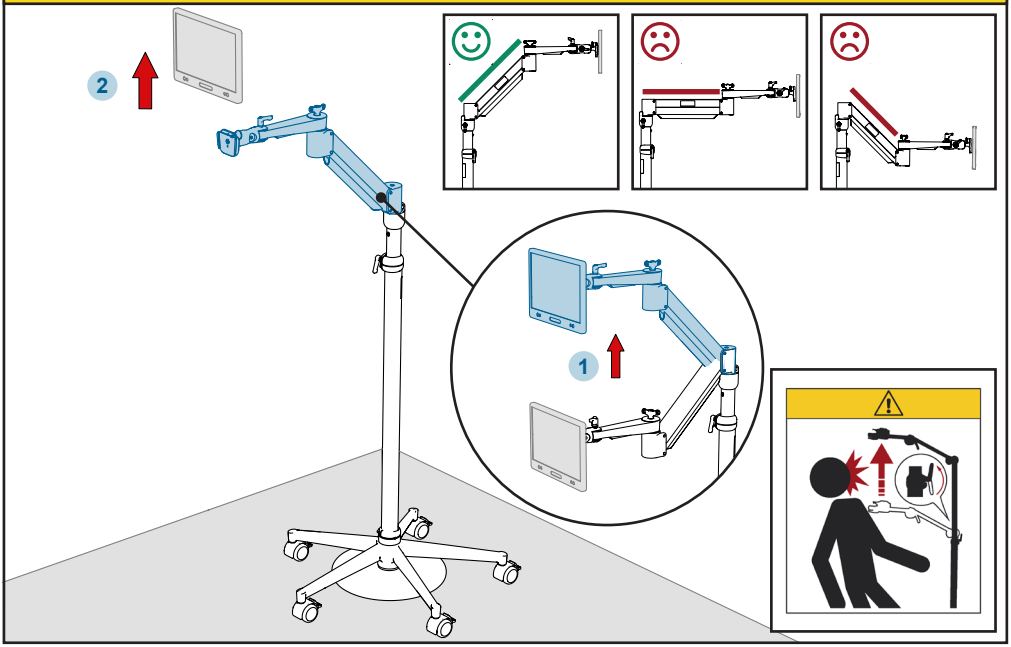


VORSICHT / *CAUTION*


17.1170 - FS PentaFloat Tele

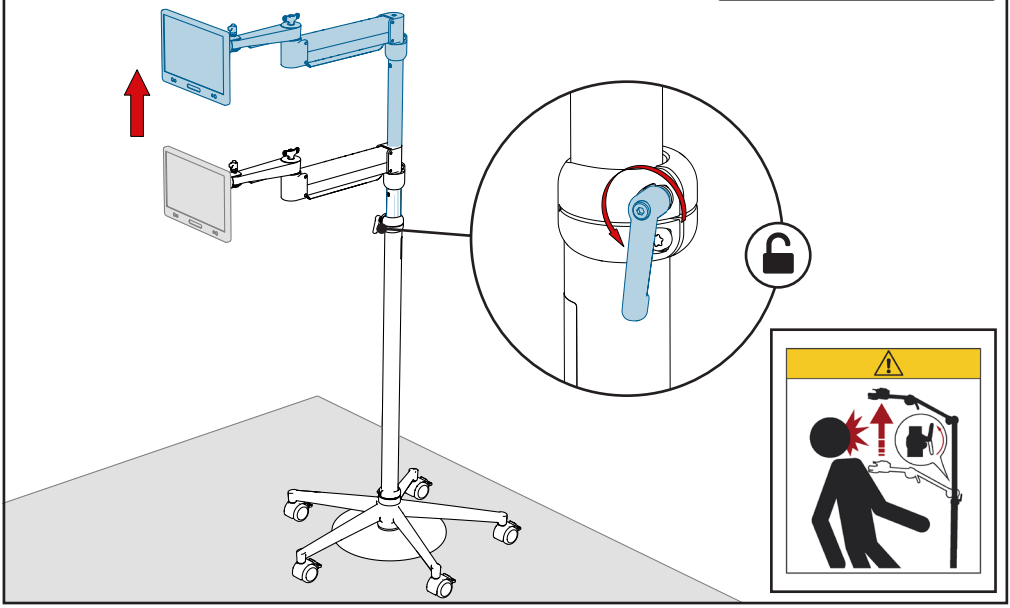

VORSICHT / *CAUTION*

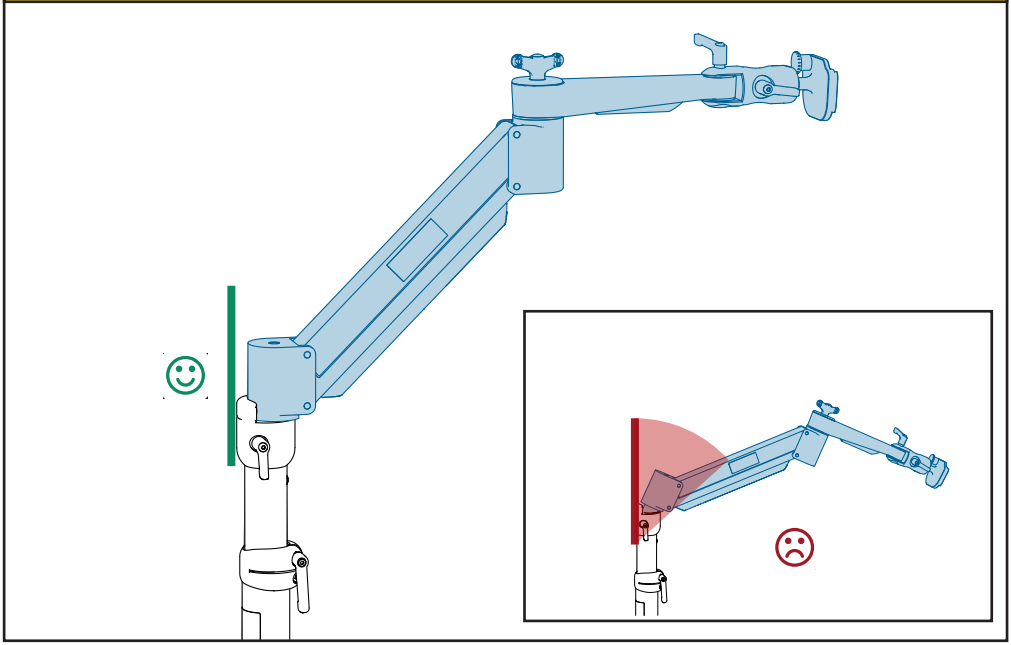


VORSICHT / *CAUTION*

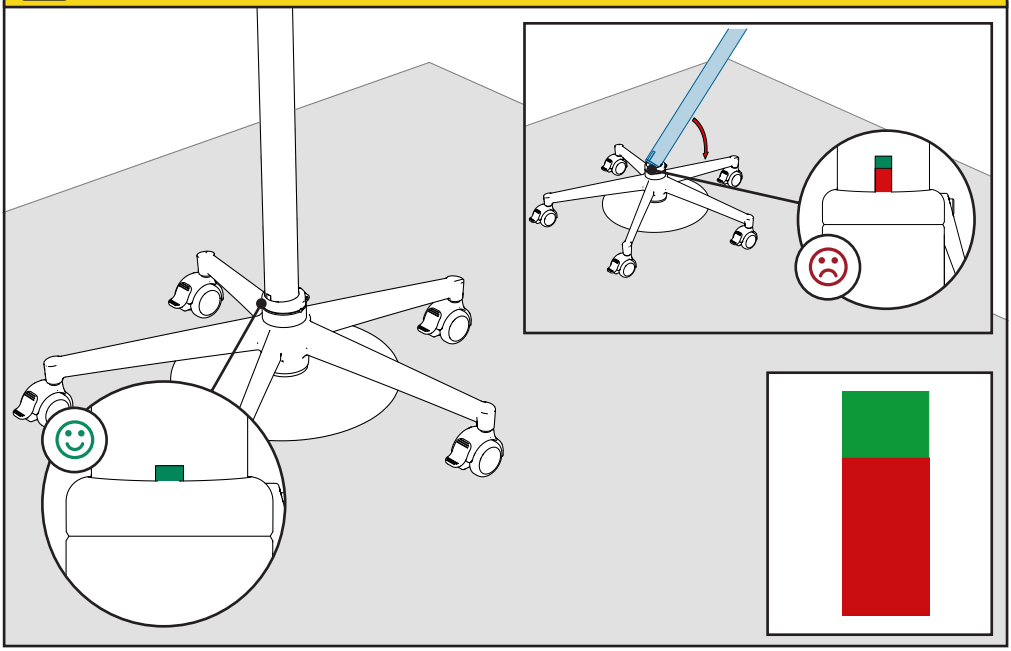


17.1170 - FS PentaFloat Tele


Abmessungen und Gewicht / *Size and Weight*

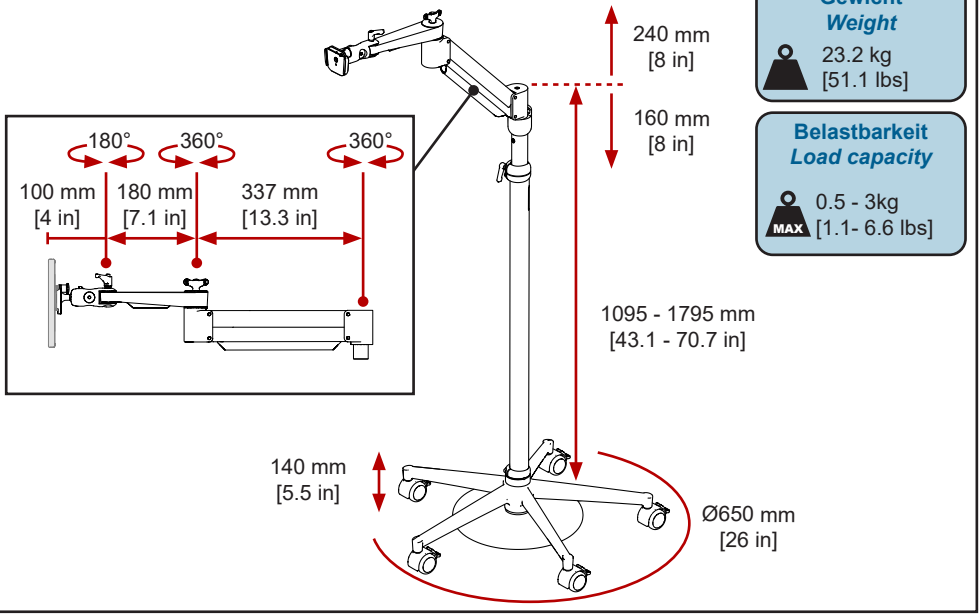

Lieferumfang / *Contents of delivery*

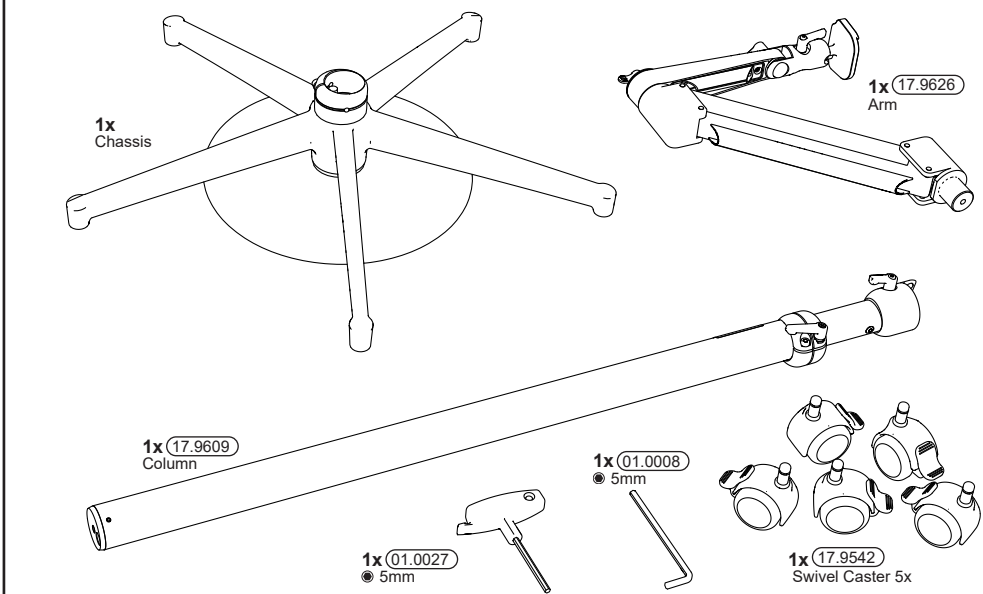


Abmessungen und Gewicht / *Size and Weight*

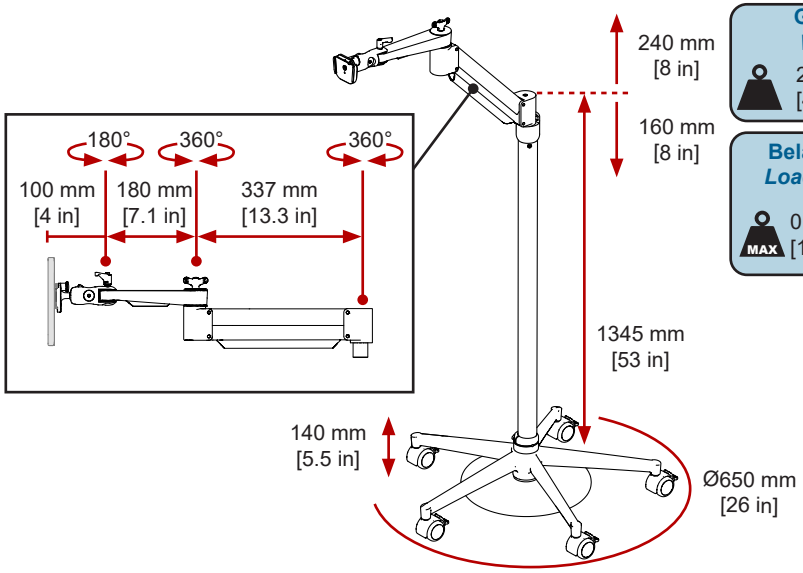


Gewicht
Weight
22.1 kg
[48.7 lbs]

Belastbarkeit
Load capacity
MAX 0.5 - 3kg
[1.1- 6.6 lbs]


Lieferumfang / *Contents of delivery*

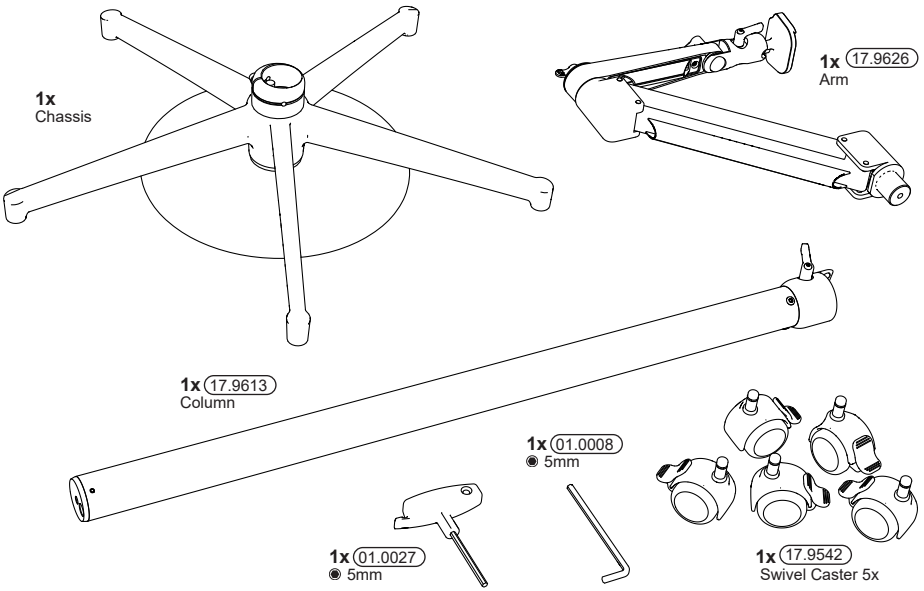


1

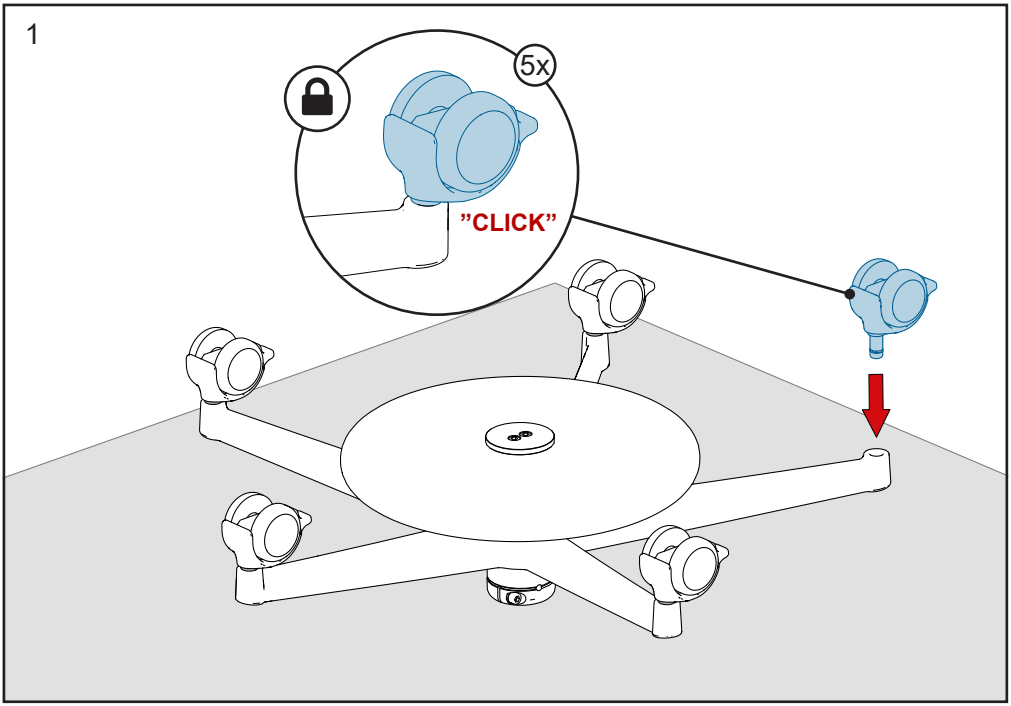


2

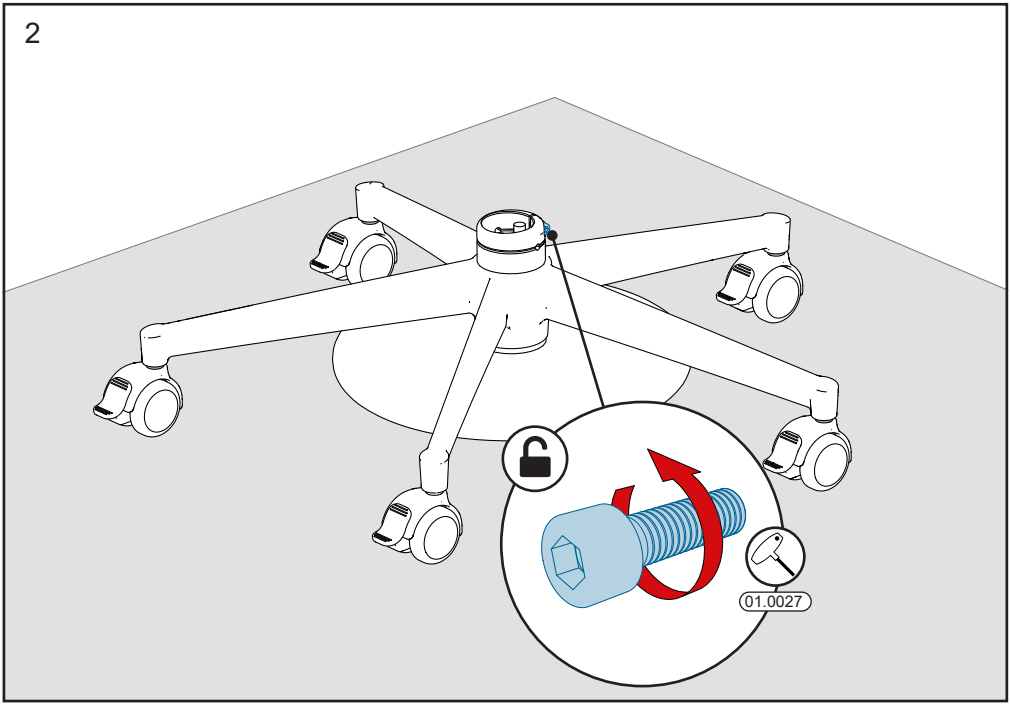


3

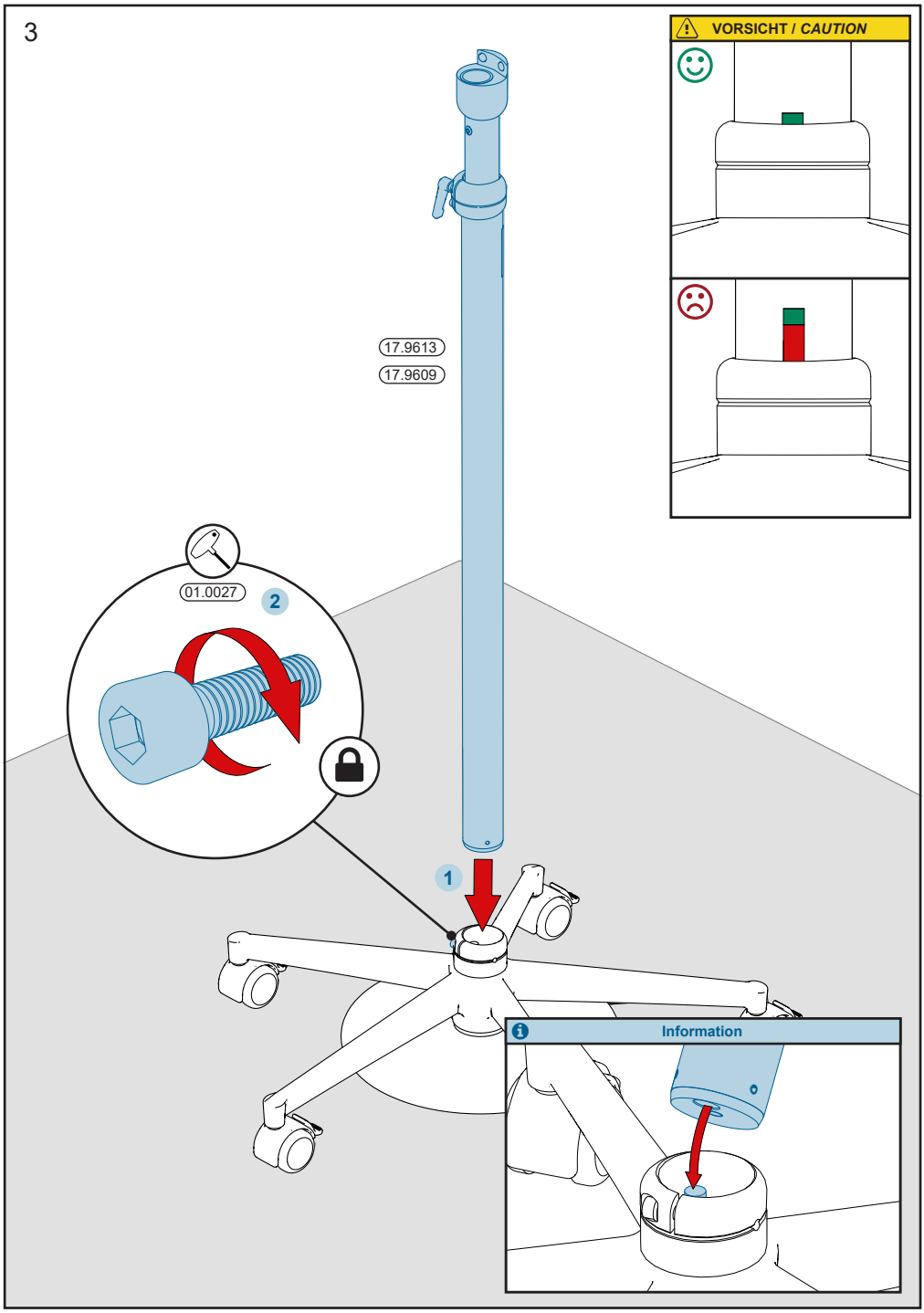


4

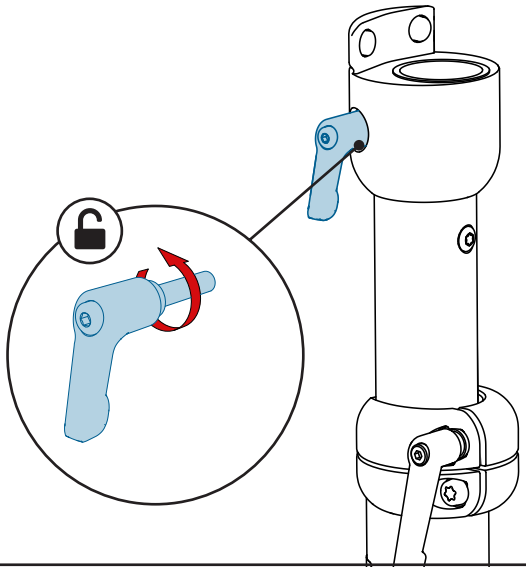


5

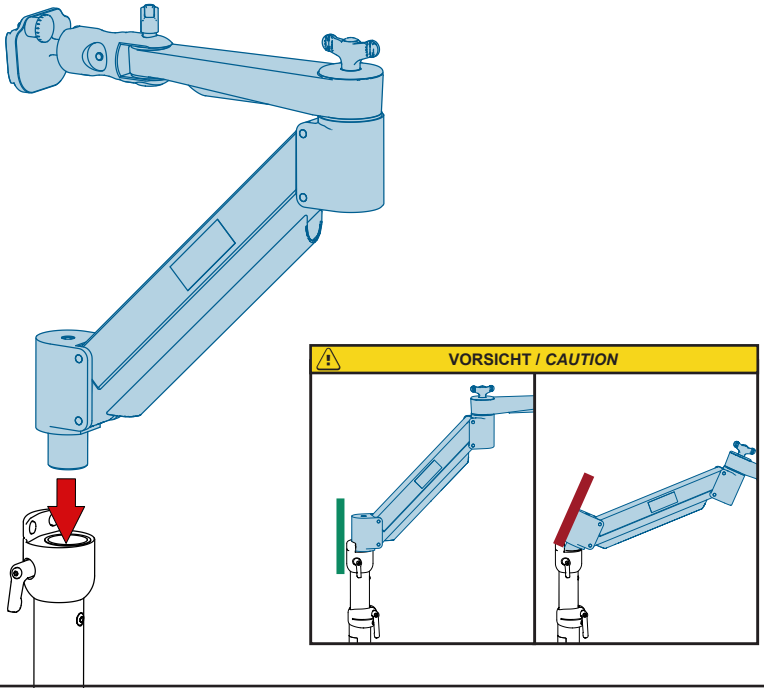


6

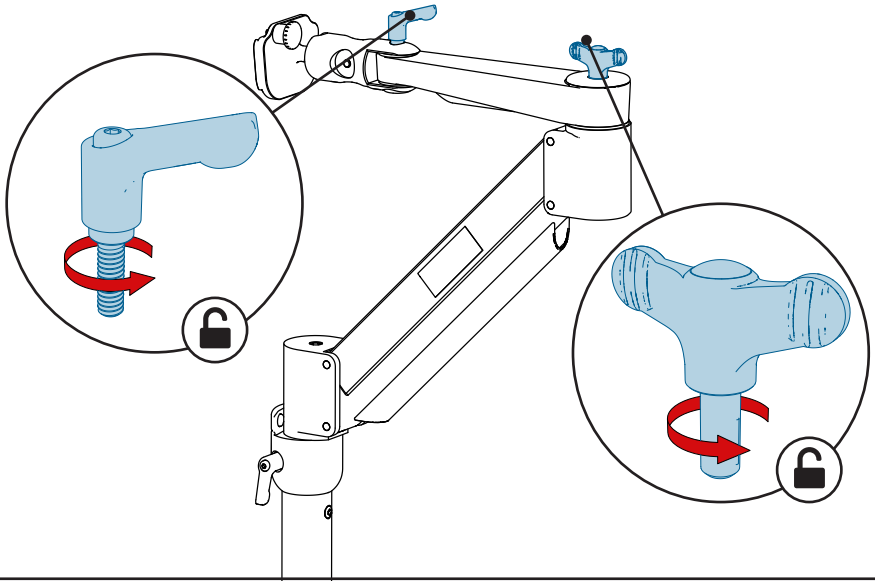


7

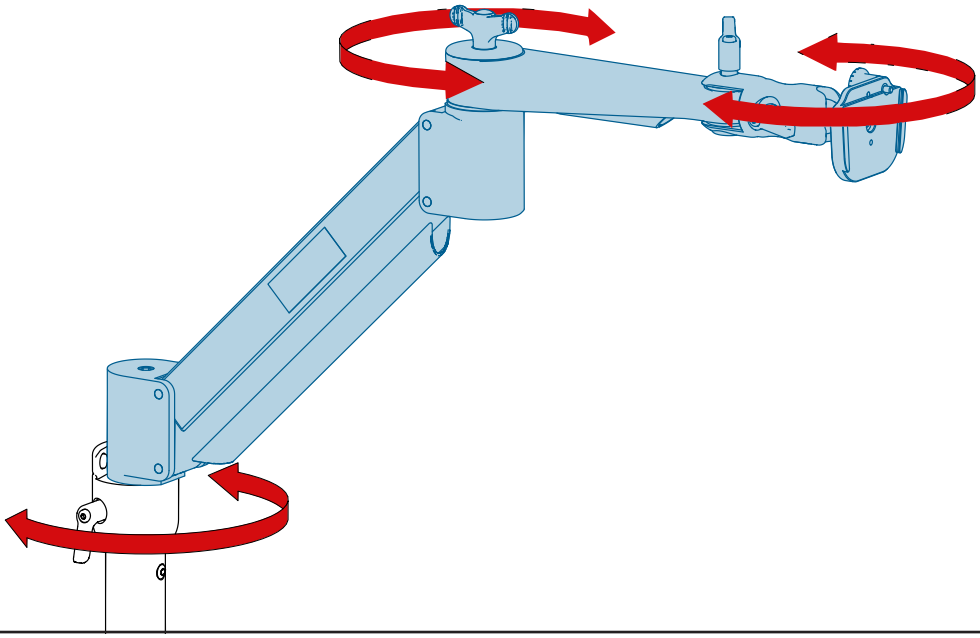


17.1170 - FS PentaFloat Tele

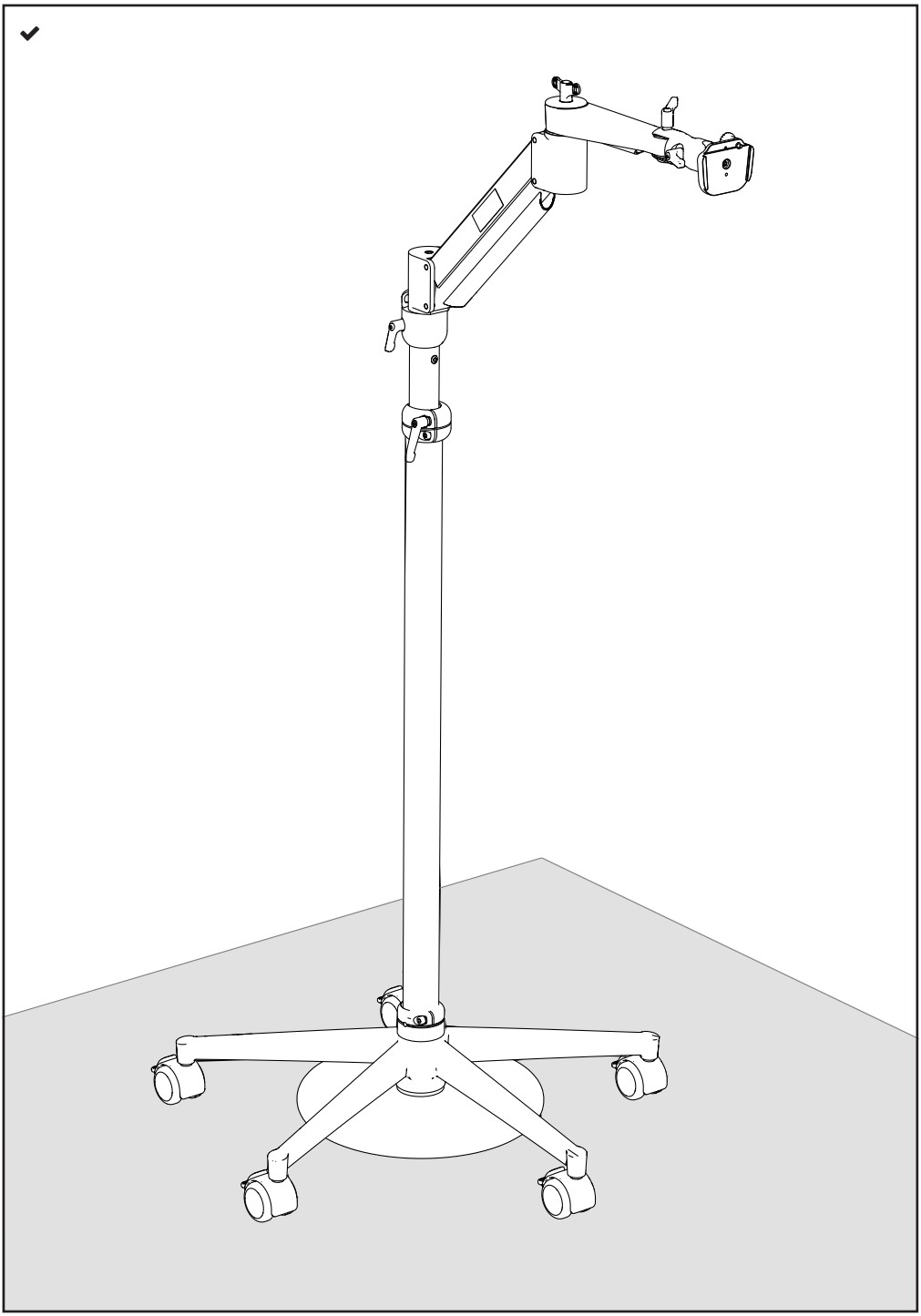


17.1172 - FS PentaFloat Eco

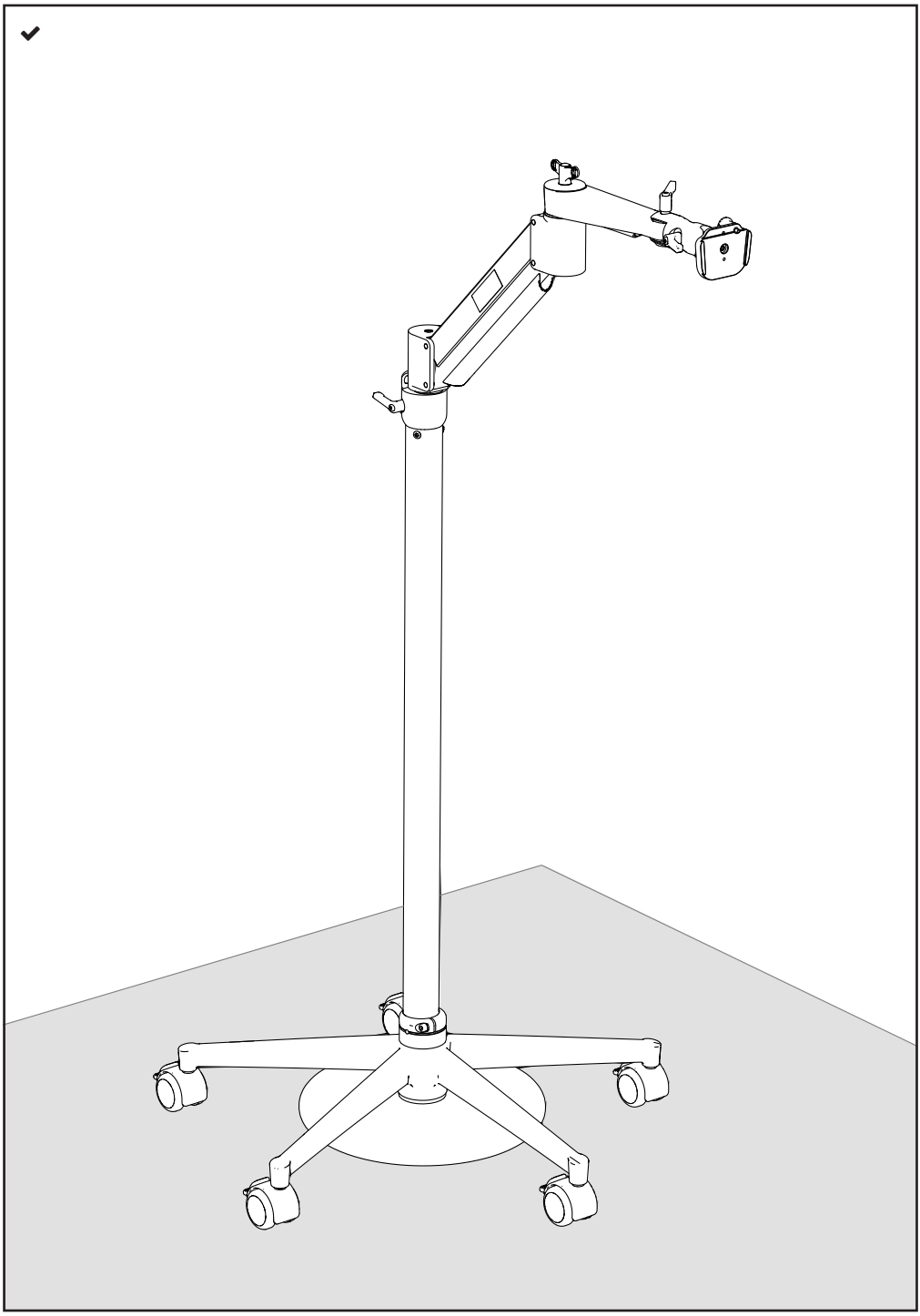


Bedienung / *Operating*

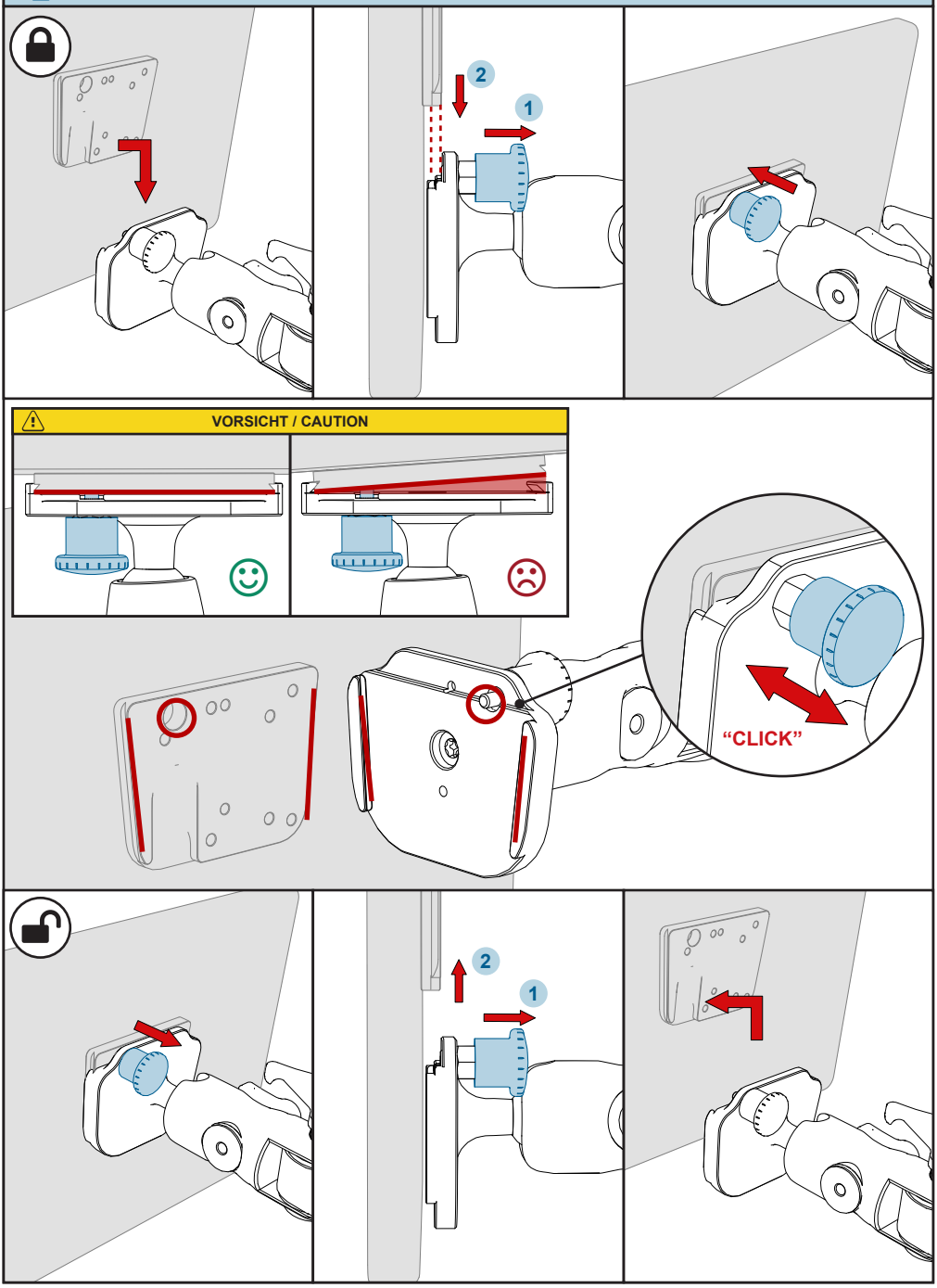

Funktion / *Function*

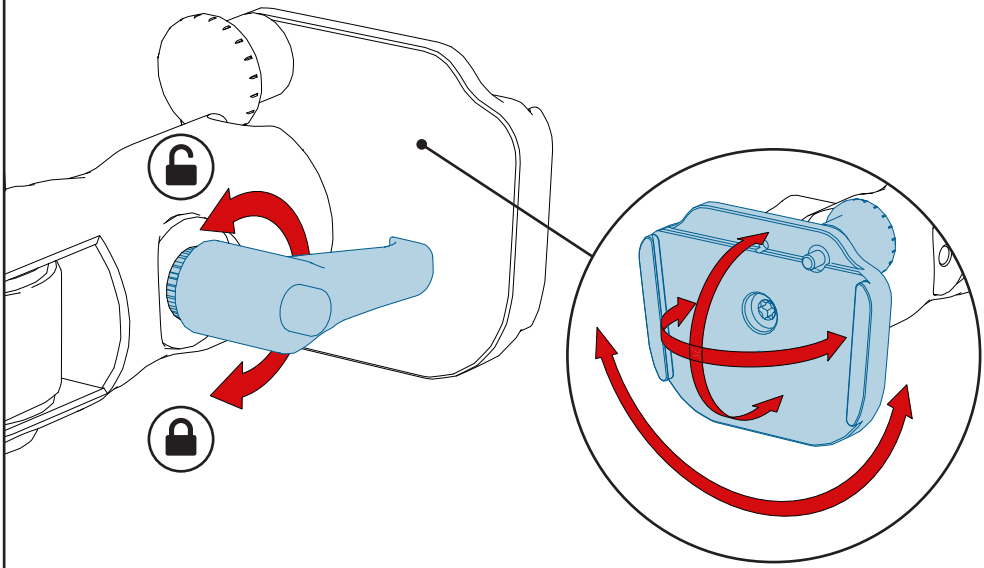

Funktion / *Function*

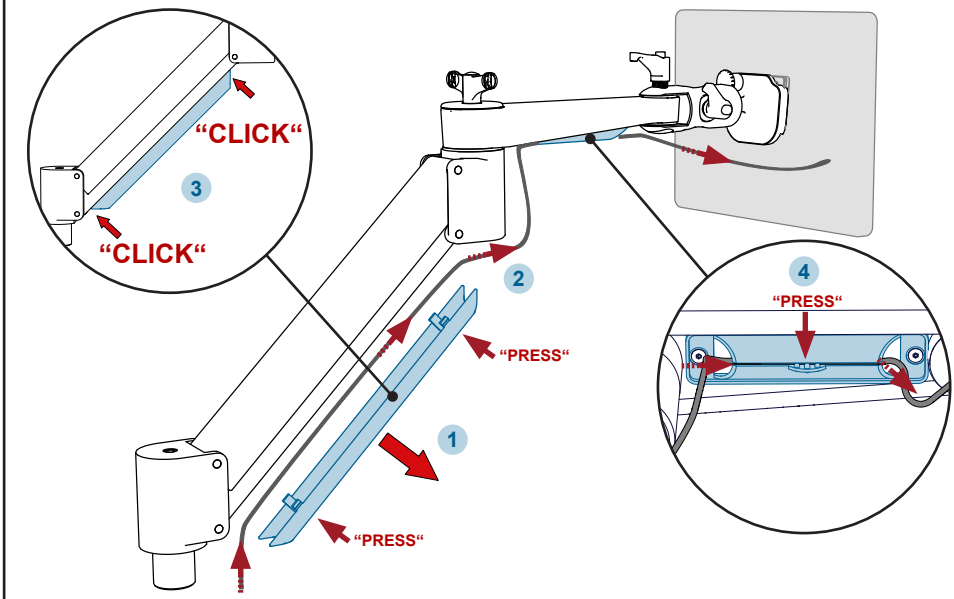

Nachjustierung / *Readjustment*

DE

VORSICHT

- Gerät muss montiert sein
- Arm muss in Halterung sein


Vor dem justieren der Einstellschraube drücken Sie den **Arm nach unten bis er ungefähr parallel zur Grundfläche ist.**
Abhängig vom Gewicht Ihres Gerätes, müssen Sie möglicherweise **15-20 Umdrehungen durchführen.**

EN

CAUTION


- *Device must be on arm*
- *Arm must be in mount*

Bring the arm to a position approximately horizontal *prior to turning the strength adjustment screw.*
Depending on the weight of your device, ***you may have to make 15 - 20 turns.***

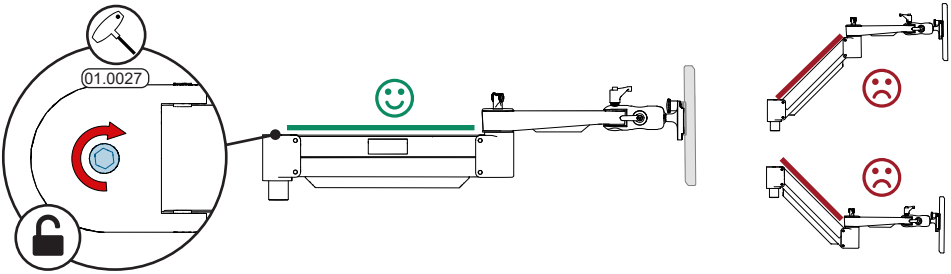


Wenn der Arm **nach oben driftet**, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn

If the arm ***drifts upward****, turn the adjustment screw clockwise.*

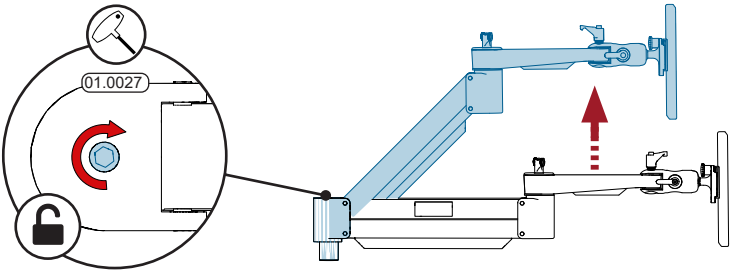

Wenn der Arm **nach unten driftet**, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.


If the arm ***drifts downward,*** *turn the adjustment screw counter-clockwise.*

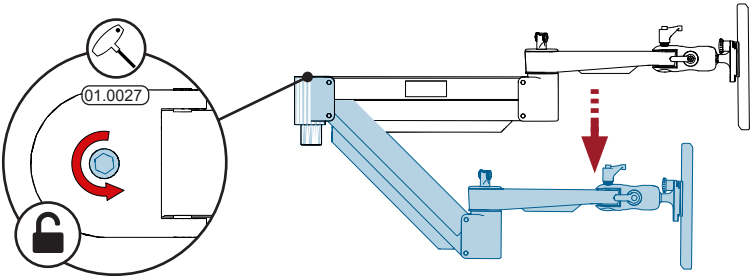


Nachjustierung / *Readjustment*

DE Stellen Sie die Gelenkspannung ein, indem Sie den Hebel, Flügelgriff oder die Schraube festziehen oder lösen, bis die gewünschte Beweglichkeit erreicht ist.

EN *Adjust the hinge joint tension by tightening or loosening the lever/winged knob/bolt until the desired level of movement is achieved.*

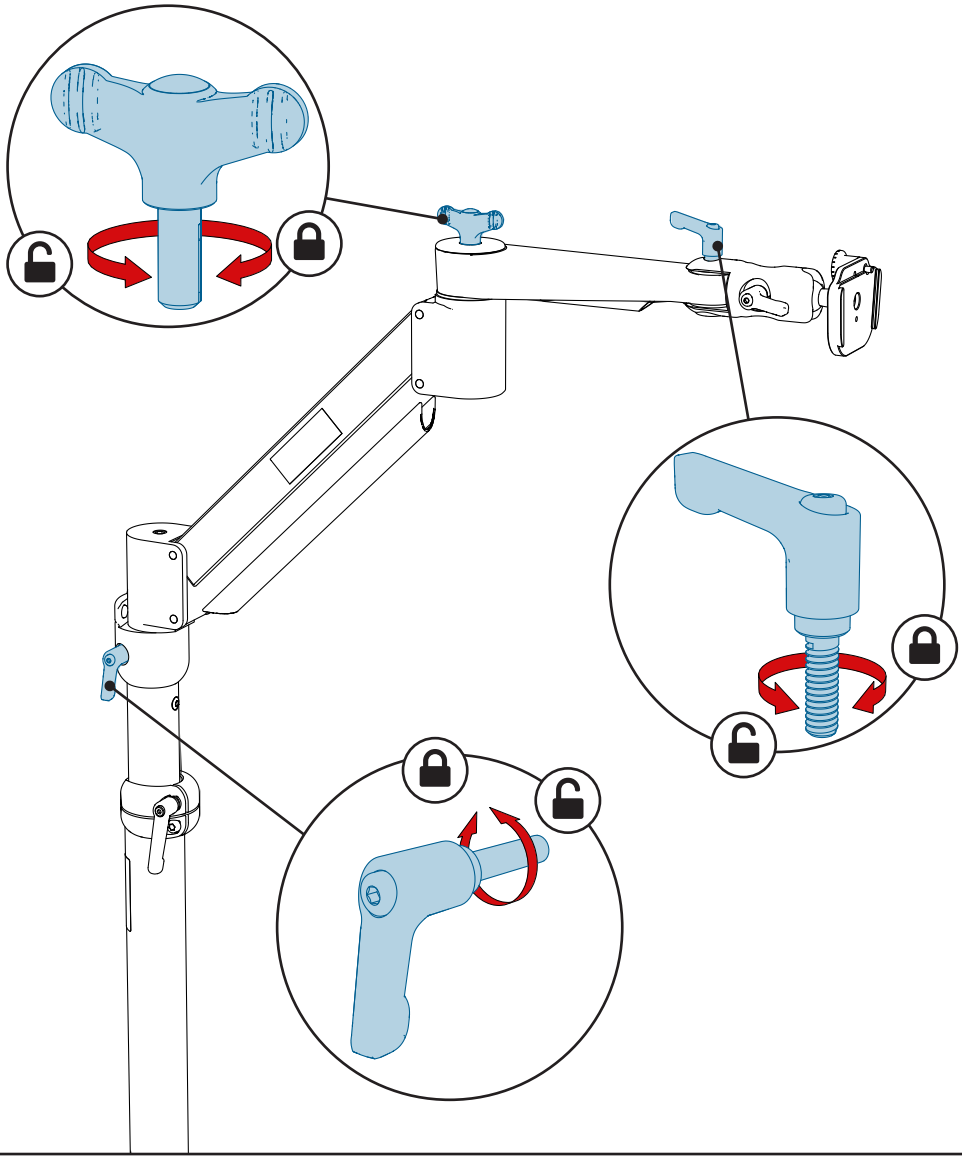


17.1170 - FS PentaFloat Tele

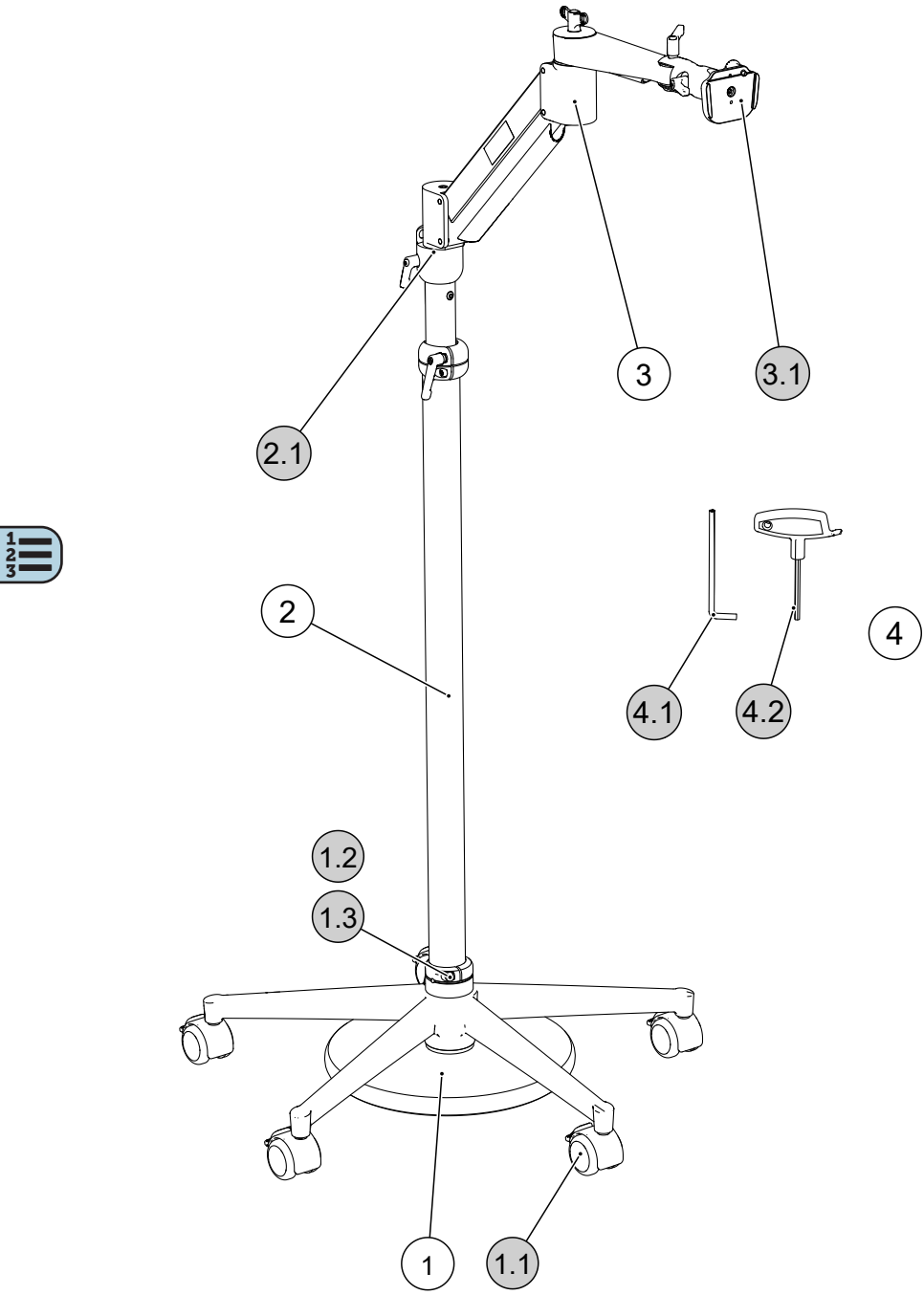

Pos.	No.	Bezeichnung	*Description*
1	17.9535	FS Fahrgestell Penta	*FS Chassis Penta*
1.1	17.9542	FS Penta Doppelrolle (5er Satz)	*FS Penta Swivel Caster (set of 5)*
1.2	01.0393	Scheibe Ø6,4 mm	*Washer Ø6.4 mm*
1.3	01.0620	Zylinderschraube M6x20	*Cylinder head bolt M6x20*
2	17.9609	FS Säule TeleFloat	*FS Column TeleFloat*
2.1	01.0109	Gleitlager FloatArm	*Sleeve Bearing FloatArm*
3	17.9626	FS FloatArm QS Light	*FS FloatArm QS Light*
3.1	16.1071	UGA Float QS	*UDS Float QS*
4		Montagekit	*Mounting kit*
4.1	01.0027	Innensechskantschlüssel 5mm lang	*Allen wrench 5mm long*
4.2	01.0027	T-Griff	*T-Handle*

17.1172 - FS PentaFloat Eco

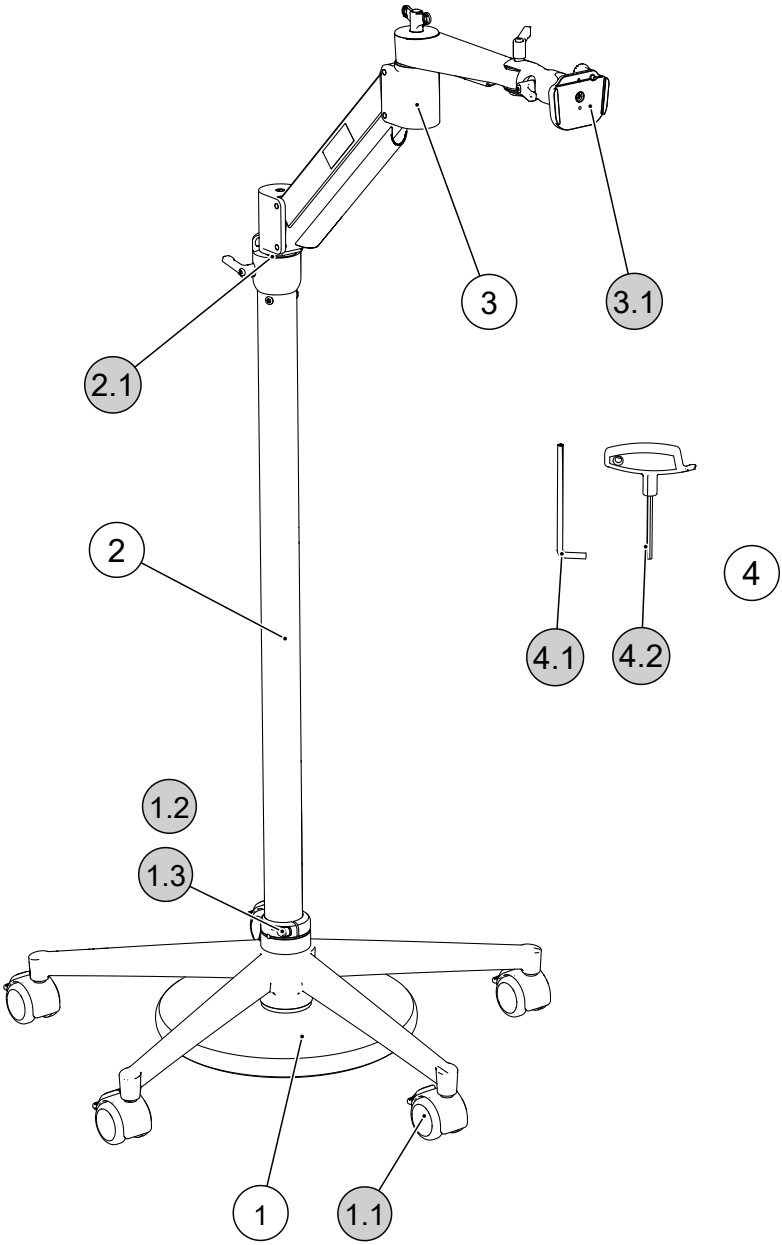

Pos.	No.	Bezeichnung	*Description*
1	17.9535	FS Fahrgestell Penta	*FS Chassis Penta*
1.1	17.9542	FS Penta Doppelrolle (5er Satz)	*FS Penta Swivel Caster (set of 5)*
1.2	01.0393	Scheibe Ø6,4 mm	*Washer Ø6.4 mm*
1.3	01.0620	Zylinderschraube M6x20	*Cylinder head bolt M6x20*
2	17.9608	FS Säule EcoFloat	*FS Column EcoFloat*
2.1	01.0109	Gleitlager FloatArm	*Sleeve Bearing FloatArm*
3	17.9626	FS FloatArm QS Light	*FS FloatArm QS Light*
3.1	16.1071	UGA Float QS	*UDS Float QS*
4		Montagekit	*Mounting kit*
4.1	01.0027	Innensechskantschlüssel 5mm lang	*Allen wrench 5mm long*
4.2	01.0027	T-Griff	*T-Handle*

We ♥ your feedback

Rehadapt

Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany

+49 561 220 717 0

officeteam@rehadapt.com
https://rehadapt.com

Rehadapt
North America

1400 Cherrington Parkway,
Building 100
Coraopolis, PA 15108, USA

+1 888 635 6962
+1 888 635 6962
officeteam.na@rehadapt.com
https://rehadapt.com